



## Cryotec upute za korisnike

**Glavni materijal:** tijelo (sadržaj: polietilen tereftalat 98%), folija (sadržaj: polietilen tereftalat  $\geq 99\%$ )

**Oblik:** Pohrana tkiva

**Model:** TEC 010Y, TEC 010B, TEC 010W, TEC 010R, TEC 010G

**Pakiranje:** Unutarnji paket: PP (polipropilen) otporan na gama / Vanjsko pakiranje: OPP (Oriented Polypropylene) vrećica

**Sterilizacija:** Gama sterilizirana

**Temperatura:** Tijekom pohrane: 10°C–25°C

**Rok trajanja:** 2 godine nakon datuma sterilizacije.

**Namjena:** Za vitrificiranje stanica, tkiva, oocita, embrija i blastociste sisavaca.

**Upute za korištenje:**

Skinite poklopac, stavite stanice na prozirni list tako da krioprotektant bude dovoljno infiltriran. Odmah stavite tekući dušik da se zamrzne. Pincetama, zatvorite poklopac unutar tekućeg dušika i pohranite u spremnik za tekući dušik. U vrijeme odmrzavanja, pincetama, otvorite poklopac unutar tekućeg dušika i obavite posao odmrzavanja.

**Postupak zbrinjavanja:** Budući da bi proizvod nakon korištenja bio kontaminiran, molimo zbrinite ga na odgovarajući način u skladu s lokalnim zakonima i propisima.

**REPROLIFE Inc.**  
2-5-3-9F Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo, 160-0022 Japan  
Telefon: +81359258931  
E-mail: [contact@reprolife.jp](mailto:contact@reprolife.jp) URL proizvoda: <https://reprolife.jp/en>

**EC REP** MT Promedt Consulting GmbH  
Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Njemačka  
Telefon: +496894581020



IFU-003503, 2026-04-23 1/3


### Pažnja:

- 1) Držite platu da ne dodiruje poklopac dok skidate i stavljate poklopac.
- 2) Čitav postupak s Cryotecom treba provoditi na sobnoj temperaturi.
- 3) Prilikom postavljanja čep nemojte čvrsto hvatati pincetom jer to može oštetiti proizvod.
- 4) Prilikom potpunog zatezanja čepa nemojte koristiti pincetu. Čep radije čvrsto postavite prstima kako se čep ne bi olabavio i uzrokovao oštećenje proizvoda.


### Mjera opreza:

- 1) Ako uočite bilo kakve abnormalnosti na pakiranju ili proizvodu, nemojte ga koristiti.
- 2) Ako je istekao datum valjanosti, proizvod se ne može koristiti.
- 3) Ovaj uređaj smije koristiti samo stručnjak s tehnikom i iskustvom.
- 4) Ovaj uređaj je samo za jednokratnu uporabu.

### Vitrifikacija

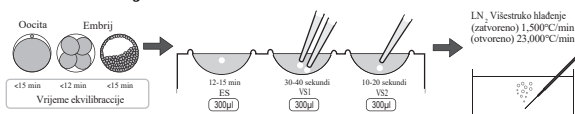

### Zagrijavanje

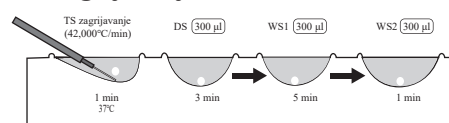

- \* Preporučuje se korištenje otopine i ploča za vitrificaciju i zagrijavanje.  
\* Otopina ili ploče za vitrificaciju i zagrijavanje nose se zasebno.

**Kratice:** PP (polipropilen), OPP (orijentirani polipropilen), ES (otopina za ekvibraciju), VS1 (otopina za vitrificaciju 1), VS2 (otopina za vitrificaciju 2), TS (otopina za zagrijavanje), DS (otopina za razrjeđivanje), WS1 (otopina za pranje 1), WS2 (otopina za pranje 2), LN2 (tekući dušik)

IFU-003503, 2026-04-23 2/3

## Simboli

Bc.	Simbol	Opis	Bc.	Simbol	Opis	Bc.	Simbol	Opis
1		Proizvođač	7		Ne koristiti ponovno	13		Ograničenje temperature
2		Kataloški broj	8		Ne sterilizirati ponovno	14		Zemlja proizvodnje Proizvedeno u Japanu
3		Ovlašteni predstavnik u EZ-u	9		Sterilizirano zračenjem	15		Medicinski proizvod
4		Upotrijebiti do	10		Pogledati upute za uporabu	16		Sustav jednostruke sterilne barijere sa zaštitnim pakovanjem spolja
5		Datum proizvodnje	11		CE oznaka odobrena od strane DEKRA-e	17		
6		Šifra serije	12		Ne koristiti ako je jedinični paket otvoren ili oštećen	18		

IFU-003503, 2026-04-23 3/3