



## Cryotec használati utasítás

**Fő anyag:** Főréz (alapanyag: polietilén-tereftalát 98%), fólialap (alapanyag: polietilén-tereftalát  $\geq 99\%$ )

**Alak:** Szövetároló

**Modell:** TEC 010Y, TEC 010B, TEC 010W, TEC 010R, TEC 010G

**Csomagolás:** Belső csomagolás: Gamma-ellenálló PP (polipropilén) / Külső csomagolás: OPP (Orientált polipropilén) zacskó

**Szterilizálás:** Gamma szterilizált

**Hőmérséklet:** Tárolás közben:  $10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$

**Felhasználhatósági idő:** a szterilizálás dátuma után 2 év.

**Felhasználási cél:** Emlőssejtek, szövetek, petesejtek, embriók és blasztociszták vitrifikációja.

**Használati utasítás:**

Vegye le a kupakot, helyezze a sejteket az átlátszó lapra úgy, hogy a krioprotektáns kellőképpen beszívárogon. Azonnal tegye folyékony nitrogénbe, hogy megfagyjon. A csipesz segítségével zárja le a kupakot a folyékony nitrogénben, majd tárolja folyékony nitrogén tartályban. A felolvasztáskor a csipesz segítségével nyissa ki a folyékony nitrogénben lévő kupakot, majd végezze el a kiolvasztási folyamatot.

**Ártalmatlanítási folyamat:** Mivel a használatot követően a termék szennyezett lesz, kérjük, ártalmatlanítsa az adott ország törvényeinek és előírásainak megfelelően.



**REPROLIFE Inc.**

2-5-3-9F Shinjuku, Shinjuku-ku Tokió, 160-0022 Japán

Telefon: +81359258931

E-mail: [contact@reprolife.jp](mailto:contact@reprolife.jp) Termék URL: <https://reprolife.jp/en>



**MT Promedt Consulting GmbH**

Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Németország

Telefon: +496894581020



0344

IFU-005303, 2026-04-23 1/3


### Figyelem :

- 1) A kupak levétele és felhelyezése közben ügyeljen rá, hogy a lap ne érjen hozzá a kupakhoz.
- 2) A Cryotec eszközzel a teljes folyamatot szobahőmérsékleten végezze el.
- 3) A kupak felhelyezésekor ne szorítsa erősen a csipeszt, mert ez károsíthatja a terméket.
- 4) A kupak meghúzásához ne használjon csipeszt, hanem csak kézzel csavarja rá szorosan, hogy ne lazuljon meg, és ne károsítsa a terméket.


### Óvintézkedés:

- 1) Ha bármilyen sérülést észlel a csomagoláson vagy a terméken, ne használja.
- 2) Ha a szavatossági idő lejárt, a termék nem használható fel.
- 3) Az eszközt csak a megfelelő technikát ismerő, tapasztalt szakember használja.
- 4) Ez az eszköz csak egyszeri használatra szolgál.

### Vitrifikáció

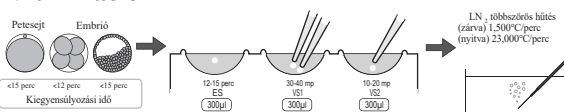

### Melegítés

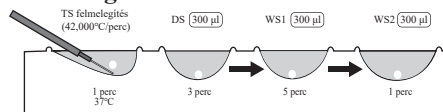

\*Vitrifikációs és melegítő oldat illetve lemezek használata javasolt.

\*A vitrifikációs és melegítő oldatot vagy a lemezeket külön szállítjuk.

**Rövidítések:** PP (polipropilén), OPP (orientált polipropilén), ES (kiegénylítő oldat), VS1 (1. vitrifikációs oldat), VS2 (2. vitrifikációs oldat),

TS (melegítő oldat), DS (hígító oldat), WS1 (1. mosóoldat), WS2 (2. mosóoldat), LN<sub>2</sub> (folyékony nitrogén)

IFU-005303, 2026-04-23 2/3

## Szimbólumok

Sorszám	Szimbólum	Leírás	Sorszám	Szimbólum	Leírás	Sorszám	Szimbólum	Leírás
1		Gyártó	7		Ne használja újra	13		Hőmérséklet-korlátozás
2		Katalógusszám	8		Ne sterilizálja újra	14		Gyártási ország Japánban gyártva
3		Meghatalmazott képviselő az EK-ban	9		Sugárzással sterilizálva	15		Orvostechnikai eszköz
4		Lejárat dátum	10		Lásd a használati utasítást	16		Egyszeres sterilgát-rendszer kívül védőcsomagolással
5		Gyártási dátum	11		CE-jelölés a DEKRA által jóváhagyva	17		
6		Tételkód	12		Ne használja, ha az egységcsomagolás fel van nyitva vagy sérült	18		

IFU-005303, 2026-04-23 3/3