

Istruzioni per l'uso della Piastra per Conservazione di Tessuti

Precauzioni: Non utilizzare prodotti la cui confezione è danneggiata. Non utilizzare il prodotto dopo la scadenza della data di validità.

Precauzioni durante l'uso: Questo dispositivo può essere utilizzato solo da uno specialista che ha seguito un corso di formazione. Questo dispositivo è monouso.

Precauzioni durante la conservazione: Non fare cadere il prodotto ed evitare che venga sottoposto a urti o eccessiva pressione.

Materiale principale: Polistirene

Forma: Piastra per Conservazione di Tessuti

Modello: VP 010 (10 pezzi), WP 010 (10 pezzi)

Imballaggio: confezione primaria: Busta in OPP / confezione secondaria: Busta in OPP (solo per 10 pezzi)

Sterilizzazione: Sterilizzato con raggi gamma

Temperatura: Durante la conservazione: Tra 10 °C e 25 °C

Data di scadenza: 2 anni dalla data di sterilizzazione.

Scopo di utilizzo: Vetrificazione o riscaldamento di cellule di mammiferi, tessuti, ovociti, embrioni e blastocisti.

Istruzioni per l'uso

Piastra Vitri: aprire la busta ed estrarre la piastra. Collocare su un supporto per microscopio. La piastra è fornita di 3 pozzetti sulla parte anteriore e una fossetta per Cryotec sulla parte posteriore. Rimuovere il coperchio e riempire ogni pozzetto con le soluzioni. Condurre l'operazione a temperatura ambiente.

Piastra riscaldante: aprire la busta, estrarre la piastra, tenere il coperchio chiuso e collocarla nell'incubatrice a 37 °C < 3 ore prima dell'uso. Estrarre dall'incubatrice e posizionare (pozzetto quadrato sul lato sinistro) sul supporto del microscopio. Rimuovere il coperchio e riempire ogni pozzetto con le soluzioni.

Condurre l'operazione a temperatura ambiente.

Smaltimento: Poiché il prodotto è da considerarsi contaminato dopo l'utilizzo, smaltire correttamente in conformità alla normativa di ogni paese.



REPROLIFE Inc.

2-5-3 9F Shinjuku, Shinjuku-Ku, Tokyo, 160-0022 Giappone Telefono: +81359258931
E-mail: contact@reprolife.jp URL del prodotto: <https://reprolife.jp/en>




MT Promedt Consulting GmbH


Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Germania
Telefono: +496894581020



Vetrificazione

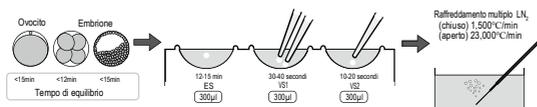

Riscaldamento

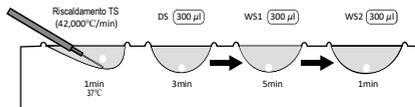

* Si consiglia di utilizzare insieme alla soluzione di vetrificazione e riscaldamento e a Cryotec.

Abbreviazioni: OPP (polipropilene orientato), ES (soluzione di equilibrio), VS1 (soluzione di vetrificazione 1), VS2 (soluzione di vetrificazione 2),

TS (soluzione di riscaldamento), DS (soluzione di diluente), WS1 (soluzione di lavaggio 1), WS2 (soluzione di lavaggio 2), LN2 (azoto liquido)

Simboli

N.º	Simbolo	Descrizione	N.º	Simbolo	Descrizione	N.º	Simbolo	Descrizione
1		Produttore	7		Non riutilizzare	13		Limitazioni di temperatura
2		Numero di catalogo	8		Non sterilizzare nuovamente	14		Paese di fabbricazione Fatto in Giappone
3		Rappresentante autorizzato nella CE	9		Sterilizzato per irradiazione	15		Dispositivo medico
4		Da utilizzare entro	10		Consultare le istruzioni per l'uso	16		Sistema di barriera sterile singola con confezionamento protettivo esterno
5		Data di produzione	11		Marcatura CE approvata da DEKRA	17		Contiene o presenza di
6		Codice lotto	12		Non utilizzare se la confezione dell'unità è aperta o danneggiata	18		