



Gebruikershandleiding Cryotec

Materiaal: behuizing (98% polyethyleentereftalaat), vel ($\geq 99\%$ polyethyleentereftalaat)

Vorm: weefselopslag

Model: TEC 010Y, TEC 010B, TEC 010W, TEC 010R, TEC 010G

Verpakking: binnenverpakking: gammabestendig PP (polypropyleen)/buitenverpakking: OPP-zakje (georiënteerd polypropyleen)

Sterilisatie: gesteriliseerd met gammastralen

Temperatuur: opslagtemperatuur: 10 °C -25 °C

Houdbaarheid: 2 jaar na de sterilisatiedatum

Gebruiksdoel: invriezen van cellen, weefsels, eicellen, embryo's en blastocysten afkomstig van zoogdieren

Gebruiksaanwijzing:

Verwijder de dop en plaats vervolgens de cellen op het transparante vel zodat er voldoende cryoprotectant is geïnfiltreerd. Plaats onmiddellijk in vloeibare stikstof om te bevriezen.

Sluit met de tang de dop in de vloeibare stikstof en bewaar in het reservoir met vloeibare stikstof. Open tijdens het ontdooien met de tang de dop in de vloeibare stikstof en voer de procedure voor het ontdooien uit.

Verwijdering: het gebruikte product kan gecontamineerd zijn. Verwijder het product in overeenstemming met de wet- en regelgeving van uw land.



REPROLIFE Inc.

2-5-3-9F Shinjuku, Shinjuku-ku Tokio, 160-0022 Japan

Telefoonnummer: +81359258931

E-mailadres: contact@reprolife.jp Website: <https://reprolife.jp/en>



MT Promedt Consulting GmbH

Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Duitsland

Telefoonnummer: +496894581020



IFU-003102, 02/09/2025 1/3


Opgelet:

- 1) Zorg ervoor dat het vel de dop niet aanraakt terwijl u de dop verwijderd of plaatst.
- 2) Gebruik het product niet en verwijder het, als de verpakking is gescheurd of beschadigd.
- 3) De hele procedure met Cryotec moet bij kamertemperatuur worden uitgevoerd.
- 4) Dit product mag uitsluitend door een specialist worden gebruikt.


Voorzorgsmaatregelen:

- 1) Producten waarbij de verpakking is beschadigd, mogen niet worden gebruikt.
- 2) Producten waarvan de geldigheidsdatum is verlopen, mogen niet worden gebruikt.
- 3) Dit product mag uitsluitend worden gebruikt door een arts die opgeleid is voor deze procedure en voldoende ervaring heeft.
- 4) Dit product is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik.

Vitrificatie (invriezen)

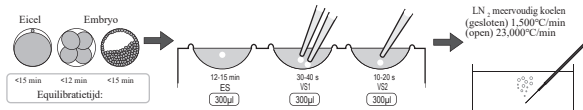

Opwarmen

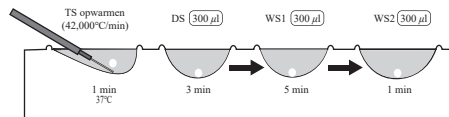

*Gebruik in combinatie met een oplossing en platen voor vitrificatie en opwarming wordt aanbevolen.

*Oplossing en platen voor vitrificatie en opwarming zijn apart verkrijgbaar.

Afkortingen: PP (polypropyleen), OPP (georiënteerd polypropyleen), ES (evenwichtoplossing), VS1 (vitrificatie-oplossing 1), VS2 (vitrificatie-oplossing 2), TS (opwarmingsoplossing), DS (verdunningsoplossing), WS1 (wasoplossing 1), WS2 (wasoplossing 2), LN2 (vloeibare stikstof)

Symbolen

Nr	Symbool	Beschrijving	Nr	Symbool	Beschrijving	Nr	Symbool	Beschrijving
1		Fabrikant	7		Niet hergebruiken	13		Temperatuurbepanking
2		Catalogusnummer	8		Niet opnieuw steriliseren	14		Land van fabricage Gemaakt in Japan
3		Gemachtigde vertegenwoordiger in de EG	9		Gesteriliseerd door bestraling	15		Medisch hulpmiddel
4		Vervaldatum	10		Raadpleeg de gebruiksaanwijzing	16		Enkelvoudig steriel barrièresysteem met beschermende verpakking aan de buitenkant
5		Productiedatum	11		CE-markering goedgekeurd door DEKRA	17		Bevat of is aanwezig
6		Partijnummer	12		Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is	18		