

Gebruikershandleiding Plaat Voor Weefselopslag

Voorzorgsmaatregelen: Producten waarbij de verpakking is beschadigd, mogen niet worden gebruikt. Producten waarvan de geldigheidsdatum is verlopen, mogen niet worden gebruikt.

Gebruik: Dit product mag uitsluitend worden gebruikt door een hiervoor opgeleide specialist. Dit product is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik.

Opslag: Vermijd schokken (bijv. vallen) en druk (bijv. overmatige belasting).

Materiaal: Polystyreen

Vorm: Plaat voor weefselopslag

Model: VP 010 (10 stuks), WP 010 (10 stuks)

Verpakking: primaire verpakking: OPP-zakje/secundaire verpakking: OPP-zakje (uitsluitend voor 10 stuks)

Sterilisatie: gesteriliseerd met gammastralen

Temperatuur: opslagtemperatuur: 10 °C - 25 °C

Houdbaarheid: 2 jaar na de sterilisatiedatum.

Gebruiksdoel: invriezen of opwarmen van cellen, weefsels, eicellen, embryo's en blastocysten afkomstig van zoogdieren

Gebruiksaanwijzing:

Plaat voor vitrificatie: open een zakje en verwijder de plaat. Plaats de plaat op de houder van de microscoop. De plaat heeft 3 kuiltjes aan de voorzijde en een gleufje voor Cryotec aan de achterzijde. Verwijder het deksel en vul elk kuiltje met oplossing. Voer de procedure bij kamertemperatuur uit.

Plaat voor opwarming: open een zakje, verwijder de plaat en houd het deksel gesloten en plaats deze dan in de incubator bij 37 °C <3 uur alvorens te gebruiken. Haal het uit de incubator en plaats het (een vierkant kuiltje aan de linkerzijde) op de houder van de microscoop. Verwijder het deksel en vul elk kuiltje met oplossing.

Voer de procedure bij kamertemperatuur uit.


Verwijderen: het gebruikte product kan gecontamineerd zijn. Verwijder het product in overeenstemming met de wet- en regelgeving van uw land.

REPROLIFE Inc.
2-5-3 9F Shinjuku, Shinjuku-Ku Tokio, 160-0022 Japan Telefoonnummer: +81359258931
E-mailadres: contact@reprolife.jp, Website: https://reprolife.jp/en


ECREP MT Promedt Consulting GmbH
Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Duitsland
Telefoonnummer: +496894581020



Vitrificatie (invriezen)

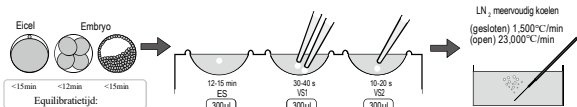

Opwarmen

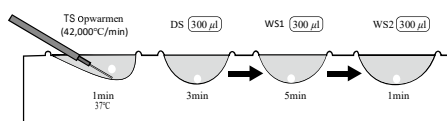

*Gebruik in combinatie met een oplossing voor vitrificatie en opwarming, en Cryotec wordt aanbevolen.

Afkortingen: OPP (georiënteerd polypropyleen), ES (evenwichtoplossing), VS1 (vitrificatie-oplossing 1), VS2 (vitrificatie-oplossing 2),

TS (opwarmingsoplossing), DS (verdunningsoplossing), WS1 (wasoplossing 1), WS2 (wasoplossing 2), LN2 (vloeibare stikstof)

Symbolen

Nr	Symbool	Beschrijving	Nr	Symbool	Beschrijving	Nr	Symbool	Beschrijving
1		Fabrikant	7		Niet hergebruiken	13		Temperatuurbepierking
2		Catalogusnummer	8		Niet opnieuw steriliseren	14		Land van fabricage Gemaakt in Japan
3		Gemachtigde vertegenwoordiger in de EG	9		Gesteriliseerd door bestraling	15		Medisch hulpmiddel
4		Vervaldatum	10		Raadpleeg de gebruiksaanwijzing	16		Enkelvoudig steriel barrièresysteem met beschermende verpakking aan de buitenkant
5		Productiedatum	11		CE-markering goedgekeurd door DEKRA	17		Bevat of is aanwezig
6		Partijnummer	12		Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is			