



Οδηγίες της Cryotec για χρήστες

Κύριο υλικό: Σώμα (Περιεχόμενο: τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο 98%), φύλλο μεμβράνης (Περιεχόμενο: τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο $\geq 99\%$)

Μορφή: Αποθήκευση ιστών

Μοντέλο: TEC 010Y, TEC 010B, TEC 010W, TEC 010R, TEC 010G

Συσκευασία: Εσωτερική συσκευασία: Ανθεκτικό στις ακτίνες γάμμα PP (πολυπροπυλένιο) / Εξωτερική συσκευασία: Σακουλάκι από OPP (Προσανατολισμένο πολυπροπυλένιο).

Αποστείρωση: Αποστειρωμένο με ακτίνες γάμμα

Θερμοκρασία: Κατά την αποθήκευση: 10°C~25°C

Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια μετά την ημερομηνία αποστείρωσης.

Σκοπός χρήσης: Για υαλοποίηση κυττάρων, ιστών, ωαρίων, εμβρύων και βλαστοκύστεων θηλαστικών.

Οδηγίες χρήσης:

Αφαιρέστε το καπάκι, τοποθετήστε τα κύτταρα στο διαφανές φύλλο έτσι ώστε το κρυοπροστατευτικό μέσο να διεισδύσει αρκετά. Αμέσως βάζετε μέσα υγρό άζωτο ώστε να παγώσει. Χρησιμοποιώντας τη λαβίδα, κλείστε το καπάκι μέσα στο υγρό άζωτο και αποθηκεύστε το σε δεξαμενή υγρού αζώτου. Κατά τη στιγμή της απόψυξης, χρησιμοποιώντας τη λαβίδα, ανοίξετε το καπάκι μέσα στο υγρό άζωτο και προβείτε στην εργασία απόψυξης.

Διαδικασία απόρριψης: Επειδή το προϊόν μετά τη χρήση θα ήταν μολυσμένο, απορρίψτε το κατάλληλα, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας.



REPROLIFE Inc.

2-5-3-9F Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo, 160-0022 Japan

Τηλέφωνο: +81359258931

E-mail: contact@reprolife.jp URL προϊόντος: <https://reprolife.jp/en>



MT Promedt Consulting GmbH

Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Γερμανία

Τηλέφωνο: +496894581020



IFU-003302, 02/09/2025 1/3


Προσοχή:

- 1) Κρατήστε το φύλλο σε απόσταση ώστε να μην ακουμπά στο καπάκι ενώ αφαιρείτε το καπάκι και το επανατοποθετείτε.
- 2) Εάν η συσκευασία έχει σχιστεί ή καταστραφεί, μην τη χρησιμοποιήσετε και απορρίψτε την.
- 3) Η όλη διαδικασία χρήσης του Cryotec θα πρέπει να εκτελείται σε θερμοκρασία δωματίου.
- 4) Η χρήση επιτρέπεται να γίνει μόνο από ειδικό.


Προφύλαξη:

- 1) Προϊόντα με φθαρμένη συσκευασία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
- 2) Εάν παρέλθει η ημερομηνία ισχύος, το εν λόγω προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- 3) Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο από γιατρό με τεχνική και εμπειρία.
- 4) Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για μία χρήση.

Υαλοποίηση

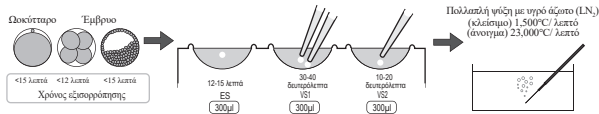

Θέρμανση

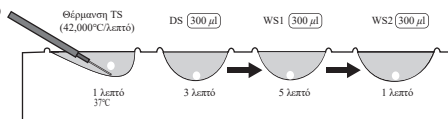

*Συνιστάται η χρήση του διαλύματος και των πλακών υαλοποίησης και θέρμανσης.

*Το διάλυμα ή οι πλάκες υαλοποίησης και θέρμανσης μεταφέρονται χωριστά.

Συντομογραφίες: PP (Πολυπροπυλένιο), OPP (Προσανατολισμένο πολυπροπυλένιο), ES (Διάλυμα εξισορρόπησης), VS1 (Διάλυμα Υαλοποίησης 1), VS2 (Διάλυμα Υαλοποίησης 2), TS (Διάλυμα Θέρμανσης), DS (Διάλυμα Αραιωτικού), WS1 (Διάλυμα Πλύσης 1), WS2 (Διάλυμα πλύσης 2), LN2 (Υγρό άζωτο)

Σύμβολα

Αριθμός	Σύμβολο	Περιγραφή	Αριθμός	Σύμβολο	Περιγραφή	Αριθμός	Σύμβολο	Περιγραφή
1		Παρασκευαστής	7		Μην επαναχρησιμοποιείτε	13		Περιορισμός θερμοκρασίας
2		Αριθμός καταλόγου	8		Μην επαναποστειρώνετε	14		Χώρα κατασκευής Κατασκευάζεται στην Ιαπωνία
3		Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΚ	9		Αποστειρωμένο με ακτινοβολία	15		Ιατροτεχνολογικό προϊόν
4		Χρήση έως	10		Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης	16		Ενιαίο σύστημα αποστειρωμένου φραγμού με εξωτερική προστατευτική συσκευασία
5		Ημερομηνία κατασκευής	11		Σήμανση CE εγκεκριμένη από την DEKRA	17		Περιέχει ή παρουσία
6		Κωδικός παρτίδας	12		Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά	18		