

Πλάκα αποθήκευσης ιστού - Οδηγίες για χρήστες

Προφύλαξη: Προϊόντα με κατεστραμμένη συσκευασία δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν. Εάν παρέλθει η ημερομηνία ισχύος, αυτό το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Προσοχή κατά τη χρήση: Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο από ειδικό που παρακολούθησε μαθήματα κατάρτισης. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για μία χρήση.

Προσοχή κατά την αποθήκευση: Αποφύγετε το τράνταγμα ή πίεση, όπως πτώση και εφαρμογή μεγάλου φορτίου.

Κύριο υλικό: Πολυστυρένιο

Μορφή: Πλάκα αποθήκευσης ιστών

Μοντέλο: VP 010 (10 τμχ), WP 010 (10 τμχ)

Συσκευασία: Κύρια συσκευασία: Φακελάκι OPP / Δευτερεύον πακέτο: Φακελάκι OPP (μόνο για 10 τεμάχια)

Αποστείρωση: Αποστειρωμένο με ακτίνες γάμμα

Θερμοκρασία: Κατά την αποθήκευση: 10°C ~ 25°C

Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια μετά την ημερομηνία αποστείρωσης.

Σκοπός χρήσης: Για υαλοποίηση κυττάρων, ιστών, ωαρίων, εμβρύων και βλαστοκύστεων θηλαστικών.

Οδηγίες χρήσης

Πλάκα υαλοποίησης (Vitri Plate): Ανοίξετε ένα σακουλάκι και βγάλτε την πλάκα. Τοποθετήστε την σε βάση μικροσκοπίου. Η πλάκα έχει 3 θέσεις στην μπροστινή πλευρά και μια αulάκα για το Cryotec στην πίσω πλευρά. Πάρτε το καπάκι και γεμίστε κάθε αulάκα με διαλύματα. Διεξαγωγή σε θερμοκρασία δωματίου.

Θερμή πλάκα: Ανοίξετε ένα σακουλάκι, βγάλτε την πλάκα, κρατήστε κλειστό το καπάκι και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την στον κλβανο επώασης στους 37°C < 3 ώρες πριν τη χρήση. Βγάλτε το από τον κλβανο επώασης και τοποθετήστε το (μια τετράγωνη θέση στην αριστερή πλευρά) στη βάση του μικροσκοπίου. Πάρτε το καπάκι και γεμίστε κάθε αulάκα με διαλύματα.

Διεξαγωγή σε θερμοκρασία δωματίου.


Λαδικασία απόρριψης: Επειδή το προϊόν μετά τη χρήση θα ήταν μολυσμένο, απορρίψτε το κατάλληλα, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας

REPROLIFE Inc.
2-5-3 9F Shinjuku, Shinjuku-Ku, Tokyo, 160-0022 Japan Τηλέφωνο: +81359258931
E-mail: contact@reprolife.jp URL προϊόντος: <https://reprolife.jp/en>


ECREP MT Promedt Consulting GmbH
Ernst-Heckel-Strasse 7, 66386 St. Ingbert Γερμανία
Τηλέφωνο: +496894581020

CE
0344

Υαλοποίηση

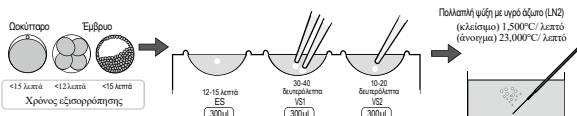

Θέρμανση

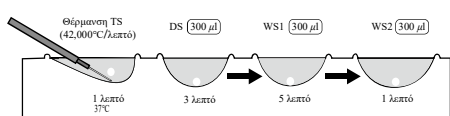

* Συνιστάται συνδυασμένη χρήση με διάλυμα υαλοποίησης και θέρμανσης και Cryotec.

Συντομογραφίες: OPP (Προσανατολισμένο πολυπροπυλένιο), ES (Διάλυμα εξισορρόπησης), VS1 (Διάλυμα υαλοποίησης 1), VS2 (Διάλυμα υαλοποίησης 2), TS (Διάλυμα θέρμανσης), DS (Διάλυμα αραιωτικού), WS1 (Διάλυμα πλύσης 1), WS2 (Διάλυμα πλύσης 2), LN2 (Υγρό άζωτο)

Σύμβολα

Αριθμός	Σύμβολο	Περιγραφή	Αριθμός	Σύμβολο	Περιγραφή	Αριθμός	Σύμβολο	Περιγραφή
1		Παρασκευαστής	7		Μην επαναχρησιμοποιείτε	13		Περιορισμός θερμοκρασίας
2		Αριθμός καταλόγου	8		Μην επαναστεριζόνετε	14		Χώρα κατασκευής
3		Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΚ	9		Αποστειρωμένο με ακτινοβολία	15		Ιατροτεχνολογικό προϊόν
4		Χρήση έως	10		Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης	16		Ενιαίο σύστημα αποστειρωμένου φρεγμού με εξωτερική προστατευτική συσκευασία
5		Ημερομηνία κατασκευής	11		Σήμανση CE εγκεκριμένη από την DEKRA	17		Περιέχει ή παύσει
6		Κωδικός παρτίδας	12		Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά	18		