



Cryotec upute za korisnike

Glavni materijal: tijelo (sadržaj: polietilen tereftalat 98%), folija (sadržaj: polietilen tereftalat $\geq 99\%$)

Oblik: Pohrana tkiva

Model: TEC 010Y, TEC 010B, TEC 010W, TEC 010R, TEC 010G

Pakiranje: Unutarnji paket: PP (polipropilen) otporan na gama / Vanjsko pakiranje: OPP (Oriented Polypropylene) vrećica

Sterilizacija: Gama sterilizirana

Temperatura: Tijekom pohrane: 10°C~25°C

Rok trajanja: 2 godine nakon datuma sterilizacije.

Namjena: Za vitrificiranje stanica, tkiva, oocita, embrija i blastociste sisavaca.

Upute za korištenje:

Skinite poklopac, stavite stanice na prozirni list tako da krioprotektant bude dovoljno infiltriran. Odmah stavite tekući dušik da se zamrzne. Pincetama, zatvorite poklopac unutar tekućeg dušika i pohranite u spremnik za tekući dušik. U vrijeme odmrzavanja, pincetama, otvorite poklopac unutar tekućeg dušika i obavite posao odmrzavanja.

Postupak zbrinjavanja: Budući da bi proizvod nakon korištenja bio kontaminiran, molimo zbrinite ga na odgovarajući način u skladu s lokalnim zakonima i propisima.



REPROLIFE Inc.

2-5-3-9F Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo, 160-0022 Japan

Telefon: +81359258931

E-mail: contact@reprolife.jp URL proizvoda: <https://reprolife.jp/en>



MT Promedt Consulting GmbH

Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Njemačka

Telefon: +496894581020




Pažnja:

- 1) Držite platu da ne dodiruje poklopac dok skidate i stavljate poklopac .
- 2) Ako je pakiranje rastrgano ili oštećeno, nemojte ga koristiti i zbrinite ga.
- 3) Cijeli proces korištenja Cryoteka treba se izvesti na sobnoj temperaturi.
- 4) Samo ga stručnjak smije koristiti.

Mjera opreza:

- 1) Proizvodi s oštećenim pakiranjem ne mogu se koristiti.
- 2) Ako je istekao datum valjanosti, proizvod se ne može koristiti.
- 3) Ovaj uređaj koristi samo liječnik s tehnikom i iskustvom.
- 4) Ovaj uređaj je samo za jednokratnu uporabu.


Vitrifikacija

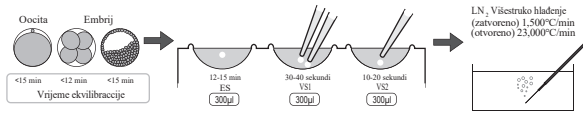

* Preporučuje se korištenje otopine i ploča za vitrifikaciju i zagrijavanje.

* Otopina ili ploče za vitrifikaciju i zagrijavanje nose se zasebno.

Zagrijavanje

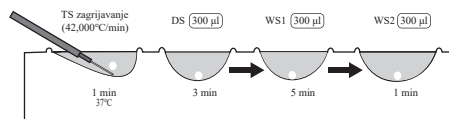

Kratice: PP (polipropilen), OPP (orijentirani polipropilen), ES (otopina za ekvibraciju), VS1 (otopina za vitrifikaciju 1), VS2 (otopina za vitrifikaciju 2), TS (otopina za zagrijavanje), DS (otopina za razrjeđivanje), WS1 (otopina za pranje 1), WS2 (otopina za pranje 2), LN2 (tekući dušik)

Simboli

Br.	Simbol	Opis	Br.	Simbol	Opis	Br.	Simbol	Opis
1		Proizvođač	7		Ne koristiti ponovno	13		Ograničenje temperature
2		Kataloški broj	8		Ne sterilizirati ponovno	14		Zemlja proizvodnje Proizvedeno u Japanu
3		Ovlašteni predstavnik u EZ-u	9		Sterilizirano zračenjem	15		Medicinski proizvod
4		Upotrijebiti do	10		Pogledati upute za uporabu	16		Sustav jednostruke sterilne barijere sa zaštitnim pakovanjem spolja
5		Datum proizvodnje	11		CE oznaka odobrena od strane DEKRA-e	17		Sadržava ili prisutnost
6		Šifra serije	12		Ne koristiti ako je jedinični paket otvoren ili oštećen	18		