

Ploča za pohranu tkiva Upute za korisnike

Mjera opreza: Proizvodi s oštećenim pakiranjem ne mogu se koristiti. Ako je rok valjanosti prošao, taj se proizvod ne može koristiti.

Pažnja tijekom uporabe: Ovaj uređaj koristi samo stručnjak koji je prošao tečaj obuke. Ovaj uređaj je samo za jednokratnu uporabu.

Pažnja tijekom pohrane: Izbjegavajte udare ili pritisak kao što su ispuštanje i primjena velikog opterećenja.

Glavni materijal: Polistiren

Oblik: Ploča za pohranu tkiva

Model: VP 010 (10kom), WP 010 (10kom)

Pakiranje: Primarno pakiranje: OPP vrećica / Sekundarni paket: OPP vrećica (samo za 10 komada)

Sterilizacija: Gama sterilizirana

Temperatura: Tijekom pohrane : 10°C ~ 25°C

Rok trajanja: 2 godine nakon datuma sterilizacije.

Namjena: Za vitrificiranje ili zagrijavanje stanice, tkiva, oocita, embrija i blastociste sisavca.

Upute za korištenje

Vitri tanjur: Otvorite vrećicu i izvadite tanjur. Stavite ga na stalak za mikroskop. Ploča ima 3 jažice na prednjoj strani i jarak za Cryotec na stražnjoj strani. Uzmite poklopac i napunite svaku jažicu otopinama. Provoditi na sobnoj temperaturi.

Topli tanjur: Otvorite vrećicu, izvadite tanjur, držite poklopac zatvorenim, a zatim ga stavite u inkubator na 37°C < 3 sata prije uporabe. Izvadite ga iz inkubatora i postavite (kvadratna jažica s lijeve strane) na stalak mikroskopa. Skinite poklopac i svaku jažicu napunite otopinama.

Provoditi na sobnoj temperaturi.


Proces zbrinjavanja: Budući da bi proizvod nakon korištenja bio kontaminiran, molimo zbrinite ga na odgovarajući način u skladu s zakonima i propisima zemlje.

REPROLIFE Inc.
2-5-3 9F Shinjuku, Shinjuku-Ku, Tokyo, 160-0022 Japan Telefon: +81359258931
E-mail: contact@reprolife.jp URL proizvođača: <https://reprolife.jp/en>


EC REP MT Promedt Consulting GmbH
Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert, Njemačka
Telefon: +496894581020

CE
0344

Vitrifikacija

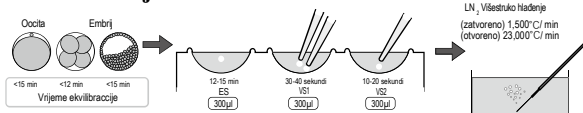

Zagrijavanje

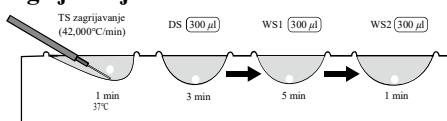

* Preporučuje se kombinirana uporaba s otopinom za vitrificaciju i zagrijavanje te Cryotec.

Kratice: OPP (orijentirani polipropilen), ES (otopina za ekvilibraciju), VS1 (otopina za vitrificaciju 1), VS2 (otopina za vitrificaciju 2),

TS (otopina za zagrijavanje), DS (otopina za razrjeđivanje), WS1 (otopina za pranje 1), WS2 (otopina za pranje 2), LN2 (tekući dušik)

Simboli

Br.	Simbol	Opis	Br.	Simbol	Opis	Br.	Simbol	Opis
1		Proizvođač	7		Ne koristiti ponovno	13		Ograničenje temperature
2		Kataloški broj	8		Ne sterilizirati ponovno	14		Zemlja proizvodnje Proizvedeno u Japanu
3		Ovlašteni predstavnik u EZ-u	9		Sterilizirano zračenjem	15		Medicinski proizvod
4		Upotrijebiti do	10		Pogledati upute za uporabu	16		Sustav jednostruke sterilne barijere sa zaštitnim pakovanjem spolja
5		Datum proizvodnje	11		CE oznaka odobrena od strane DEKRA-e	17		Sadrži ili prisutnost
6		Šifra serije	12		Ne koristiti ako je jedinični paket otvoren ili oštećen	18		