



Cryotec bruksanvisningar

Huvudmaterial: huvuddel (innehåll: polyetylentereftalat 98%), filmark (innehåll: polyetylentereftalat $\geq 99\%$)

Form: Vävnadsförvaring

Modell: TEC 010Y, TEC 010B, TEC 010W, TEC 010R, TEC 010G

Förpackning: Innerförpackning: Gamma-resistent PP (Polypropen) / Ytterförpackning: OPP (orienterad polypropen) väska

Sterilisering: Gammasteriliserad

Temperatur: Under förvaring: 10 °C - 25 °C

Hållbarhet: 2 år efter steriliseringsdatum.

Syfte för användning: För att förglasa däggdjursceller, vävnad, oocyter, embryo och blastocyst.

Instruktioner för användning:

Ta av locket, placera cellerna på det genomskinliga arket så att kryoskyddsmedel infiltreras tillräckligt. Lägg omedelbart i flytande kväve för att frysa. Stäng locket inuti det flytande kvävet med pincetten och förvara i tanken med flytande kväve. Vid upptiningen öppnar du locket i det flytande kvävet med hjälp av en pincett och gör upptiningen.

Avfallshantering: Eftersom den använda produkten skulle vara kontaminerad, bör du kassera den på rätt sätt i enlighet med landets lagar och förordningar.



REPROLIFE Inc.

2-5-3-9F Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo, 160-0022 Japan

Telefon: +81359258931

E-post: contact@reprolife.jp URL proizvoda: <https://reprolife.jp/en>



MT Promedt Consulting GmbH

Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Germany


Telefon: +496894581020



Observera:

- 1) Se till att arket inte rör vid locket medan du tar av locket och sätter på det.
- 2) Om förpackningen slits isär eller skadad får den inte användas, kassera den.
- 3) Hela processen med Cryotec bör utföras i rumstemperatur.
- 4) Endast specialister får använda den.

Vitrifiering

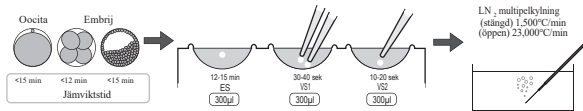

*Det rekommenderas att använda vitrifierings- och värmningslösning och plattor kombinerad.


*Vitrifierings- och uppvärmningslösning eller plattor bärs separat.

Förkortningar: PP (polypropen), OPP (orienterad polypropen), ES (ekvilibreringslösning), VS1 (vitrifieringslösning 1), VS2 (vitrifieringslösning 2), TS (uppvärmningslösning), DS (spädningslösning), WS1 (tvättlösning 1), WS2 (tvättlösning 2), LN2 (flytande kväve)

Försiktighetsåtgärd:

- 1) Produkter med skadad förpackning kan inte användas.
- 2) Om giltighetsdatumet har passerat, får produkten inte användas.
- 3) Denna anordning får endast användas av en läkare med teknisk färdighet och erfarenhet.
- 4) Denna enhet är endast för engångsbruk.

Uppvärmning

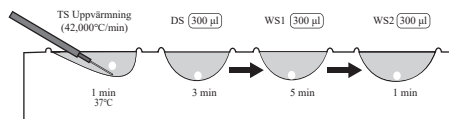

Symboler

Nr.	Symbol	Beskrivning	Nr.	Symbol	Beskrivning	Nr.	Symbol	Beskrivning
1		Tillverkare	7		Återanvänd inte	13		Temperaturbegränsning
2		Katalognummer	8		Omsterilisera inte	14		Tillverkningsland tillverkad i Japan
3		Auktoriserad representant i EG	9		Steriliserad genom strålning	15		Medicinteknisk anordning
4		Utgångsdatum	10		Rådfråga bruksanvisningarna	16		Enkelt sterilt barriärsystem med skyddande förpackning på utsidan
5		Tillverkningsdatum	11		CE-märkning godkänd av DEKRA	17		Innehåller eller förekomst av
6		Batchkod	12		Använd inte om enhetsförpackningen är öppen eller skadad	18		