



Användarinstruktioner för vävnadsförvaringsplatta

Försiktighetsåtgärd: Produkter med skadad förpackning får inte användas. Om giltighetsdatumet passerats får produkten inte användas.
Att observera vid användning: Denna enhet används endast av en specialist som har genomgått utbildning. Denna enhet är endast avsedd för engångsbruk.

Att observera under lagring: Undvik stötar eller tryck som att tappa och lägga på stor vikt.

Huvudmaterial: Polystyren

Form: Vävnadsförvaringsplatta

Modell: VP 010 (10 st), WP 010 (10 st)

Förpackning: Primärförpackning: OPP-påse / sekundärförpackning: OPP-påse (endast för 10 stycken)

Sterilisering: Gammasteriliserad

Temperatur: Under lagring: 10 °C - 25 °C

Hållbarhetstid: 2 år efter steriliseringsdatumet.

Syfte för användning: För att vitrifiera (förglasa) eller värma en däggdjurscell, vävnad, oocyt, embryo eller blastocyst.

Instruktioner för användning

Vitri-platta: Öppna en påse och ta ut plattan. Sätt den på ett mikroskopstativ. Plattan har 3 urgröpningsrör på framsidan och ett dike för Cryotec på baksidan. Ta locket och fyll varje urgröpningsrör med lösningar. Genomför vid rumstemperatur.

Varm platta: Öppna en påse, ta ut plattan, håll locket stängt och placera den sedan i inkubatorn vid 37 °C <3 timmar före användning. Ta ut den från inkubatorn och placera den (en fyrkantig urgröpningsrör på vänster sida) på mikroskopstativet. Ta locket och fyll varje urgröpningsrör med lösningar.

Genomför vid rumstemperatur.


Avfallshantering: Eftersom den efteranvända produkten är kontaminerad, kassera på rätt sätt i enlighet med landets lagar och förordningar.

REPROLIFE Inc.
2-5-3 9F Shinjuku, Shinjuku-Ku, Tokyo, 160-0022 Japan Telefon: +81359258931
E-post: contact@reprolife.jp Produkt URL: <https://reprolife.jp/en>


ECREP MT Promedt Consulting GmbH
Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Germany
Telefon: +496894581020

CE
0344

Vitrifiering

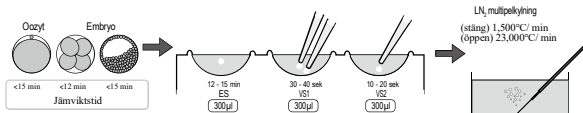

Uppvärmning

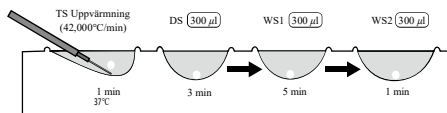

* Kombinerad användning med vitrifierings- och uppvärmningslösning samt Cryotec rekommenderas.

Förkortningar: OPP (orienterad polypropylen), ES (ekvibreringslösning), VS1 (vitrifieringslösning 1), VS2 (vitrifieringslösning 2), TS (uppvärmningslösning), DS (spädningslösning), WS1 (tvättlösning 1), WS2 (tvättlösning 2), LN2 (flytande kväve)

Symboler

Nr.	Symbol	Beskrivning	Nr.	Symbol	Beskrivning	Nr.	Symbol	Beskrivning
1		Tillverkare	7		Återanvänd inte	13		Temperaturbegränsning
2		Katalognummer	8		Omsterilisera inte	14		Tillverkningsland tillverkad i Japan
3		Auktoriserad representant i EG	9		Steriliserad genom strålning	15		Medicinteknisk anordning
4		Utgångsdatum	10		Rådfråga bruksanvisningarna	16		Enkelt sterilt barriärsystem med skyddande förpackning på utsidan
5		Tillverkningsdatum	11		CE-märkning godkänd av DEKRA	17		Innehåller eller förekomst av
6		Batchkod	12		Använd inte om enhetsförpackningen är öppen eller skadad	18		