



Pokyny pre používateľov Cryotec

Hlavný materiál: hlavná časť (obsah: polyetyléntereftalát 98 %), fólia (obsah: polyetyléntereftalát $\geq$ 99 %)

Forma: uchovávanie tkanív

Model: TEC 010Y, TEC 010B, TEC 010W, TEC 010R, TEC 010G

Balenie: vnútorný obal: gama-odolný PP (polypropylén) / vonkajší obal: vrečko z OPP (orientovaný polypropylén).

Sterilizácia: sterilizované gama žiarením

Teplota: počas skladovania: 10 °C ~ 25 °C

Čas použiteľnosti: 2 roky po dátume sterilizácie.

Účel použitia: na vitifikáciu buniek, tkanív, oocytov, embryí a blastocýst cicavcov.

Návod na použitie:

Odstráňte uzáver, umiestnite bunky na priehľadnú fóliu tak, aby do nej dostatočne prenikol kryoprotektant. Okamžite ich vložte do tekutého dusíka, aby sa zmrazili. Pomocou klieští uzavrite uzáver vnútri tekutého dusíka a uložte ho do nádrže s tekutým dusíkom. V čase rozmrazovania pomocou klieští otvorte uzáver vnútri tekutého dusíka a vykonajte rozmrazovanie.

Proces likvidácie: pretože bude výrobok po použití kontaminovaný, zlikvidujte ho správne v súlade so zákonmi a predpismi danej krajiny.



REPROLIFE Inc.

2-5-3-9F Shinjuku, Shinjuku-ku Tokio, 160-0022 Japonsko

Telefón: +81359258931

E-mail: contact@reprolife.jp URL výroba: <https://reprolife.jp/en>



MT Promedt Consulting GmbH

Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Nemecko


Telefón: +496894581020



Pozor:

- 1) Pri snímaní a nasadzovaní uzáveru sa nedotýkajte fólie.
- 2) Ak je obal roztrhnutý alebo poškodený, nepoužívajte ho a zlikvidujte ho.
- 3) Celý proces s použitím Cryotec sa má vykonávať pri izbovej teplote.
- 4) Používať ho môže iba odborník.

Vitrifikácia

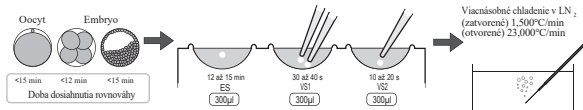

*Odporúča sa používať vitrifikačný a ohrevný roztok a doštičky.


*Vitrifikačný a ohrevný roztok alebo doštičky sa prepravujú oddelene.

Skratky: PP (polypropylén), OPP (orientovaný polypropylén), ES (ekvilibračný roztok), VS1 (vitrifikačný roztok 1), VS2 (vitrifikačný roztok 2), TS (ohrievací roztok), DS (riediaci roztok), WS1 (premývací roztok 1), WS2 (premývací roztok 2), LN2 (kvapalný dusík)

Bezpečnostné opatrenie:

- 1) Výrobky s poškodeným obalom nie je možné použiť.
- 2) Ak uplynul dátum platnosti, daný výrobok nebolo možné použiť.
- 3) Túto pomôcku môže používať len lekár, ktorý ovláda techniku a má skúsenosti.
- 4) Táto pomôcka je len na jedno použitie.

Ohrev

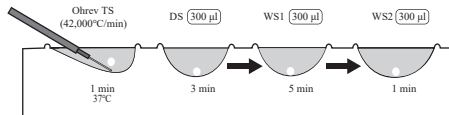

Symboly

Č.	Simbol	Opis	Č.	Simbol	Opis	Č.	Simbol	Opis
1		Výrobca	7		Nepoužívať opakovane	13		Obmedzenie teploty
2		Katalógové číslo	8		Nesterilizujte opakovane	14		Krajina výroby Vyrobené v Japonsku
3		Spplnomocnený zástupca v ES	9		Sterilizované žiarením	15		Zdravotnícka pomôcka podľa právných predpisov EÚ
4		Dátum expirácie	10		Pozrite si návod na použitie	16		Systém s jedinou sterilnu bariérou s ochranným obalom zvonka
5		Dátum výroby	11		Označenie CE schválené spoločnosťou DEKRA	17		Obsahuje alebo prítomnosť
6		Kód šarže	12		Nepoužívajte, ak je balenie jednotky otvorené alebo poškodené	18		