



Pokyny pre používateľov na používanie doštičky na uchovávanie tkaniva

Bezpečnostné opatrenie: Výrobky s poškodeným obalom nie je možné použiť. Ak uplynul dátum platnosti, daný výrobok nie je možné použiť.

Pozor pri používaní: Túto pomôcku smie používať iba špecialista, ktorý absolvoval školenie. Táto pomôcka je len na jedno použitie.

Pozor pri skladovaní: Vyhňte sa nárazom alebo tlaku, ako je pád a veľké zaťaženie.

Hlavný materiál: Polystyrén

Forma: doštička na uchovávanie tkaniva

Model: VP 010 (10ks), WP 010 (10ks)

Balenie: primárny obal: vrečko z OPP vrečko / sekundárny obal: vrečko z OPP (len na 10 kusov)

Sterilizácia: sterilizované gama žiarením

Teplota: počas skladovania: 10 °C ~ 25 °C

Čas použiteľnosti: 2 roky po dátume sterilizácie.

Účel použitia: Na vitrifikáciu alebo ohrev buniek, tkanív, oocytov, embryí a blastocýst cicavcov.

Návod na použitie

Vitrifikačná doštička: otvorte vrečko a vyberte doštičku. Položte ju na stojan mikroskopu. Doštička má 3 jamky na prednej strane a ryhu pre Cryotec na zadnej strane. Vezmite viečko a naplňte každú jamku roztokmi. Vykonávajte to pri izbovej teplote.

Ohrevná doštička: otvorte vrečko, vyberte doštičku, ponechajte viečko zatvorené a potom ju vložte do inkubátora pri teplote 37 °C < 3 hodiny pred použitím. Vyberte ju z inkubátora a položte ju (štvorcová jamka na ľavej strane) na stojan mikroskopu. Vezmite viečko a naplňte každú jamku roztokmi.

Vykonávajte to pri izbovej teplote.

Proces likvidácie: Pretože bude výrobok po použití kontaminovaný, zlikvidujte ho správne v súlade so zákonmi a predpismi danej krajiny.



REPROLIFE Inc.

2-5-3 9F Shinjuku, Shinjuku-Ku, Tokio, 160-0022 Japonsko Telefón: +81359258931

E-mail: contact@reprolife.jp Adresa URL výrobku: <https://reprolife.jp/en>




MT Promedt Consulting GmbH

Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Nemecko


Telefón: +496894581020



Vitrifikácia

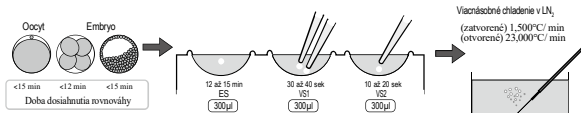

Ohrev

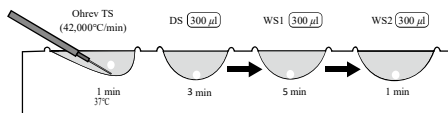

* Odporúča sa kombinované použitie s vitrifikačným a ohrevným roztokom a Cryotec

Skratky: OPP (orientovaný polypropylén), ES (ekvilibračný roztok), VS1 (vitrifikačný roztok 1), VS2 (vitrifikačný roztok 2),

TS (ohrievací roztok), DS (riediaci roztok), WS1 (premyvaci roztok 1), WS2 (premyvaci roztok 2), LN2 (kvapalný dusík)

Symbody

Č.	Symbol	Opis	Č.	Symbol	Opis	Č.	Symbol	Opis
1		Výrobca	7		Nepoužívať opakovane	13		Obmedzenie teploty
2		Katalógové číslo	8		Nesterilizujte opakovane	14		Krajina výroby Vyrobené v Japonsku
3		Spĺnomocnený zástupca v ES	9		Sterilizované žiarením	15		Zdravotnícka pomôcka podľa právnych predpisov EÚ
4		Dátum expirácie	10		Pozrite si návod na použitie	16		Systém s jedinou sterilnú bariérou s ochranným obalom zvonka
5		Dátum výroby	11		Označenie CE schválené spoločnosťou DEKRA	17		Obsahuje alebo prítomnosť
6		Kód šarže	12		Nepoužívajte, ak je balenie jednotky otvorené alebo poškodené	18		