



Pokyny pro uživatele Cryotec

Hlavní materiál: Tělo (Obsah: Polyethylentereftalát 98 %), fólie (Obsah: Polyethylentereftalát ≥ 99 %)

Forma: Tkáňové úložiště

Model: TEC 010Y, TEC 010B, TEC 010W, TEC 010R, TEC 010G

Balení: Uvnitř balení: Gama-odolný PP (polypropylen) / **Vnější obal:** Vak OPP (orientovaný polypropylen)

Sterilizace: Gamma sterilizováno

Teplota: Během skladování: 10°C~25°C

Doba použitelnosti: 2 roky po datu sterilizace.

Účel použití: K vitifikaci savčích buněk, tkání, oocytů, embryí a blastocyst.

Návod k použití:

Sejměte víčko, umístěte buňky na průhlednou fólii tak, aby byla dostatečně infiltrována kryoprotektivní látka. Okamžitě vložte dovnitř tekutý dusík, aby došlo ke zmrazení. Pomocí kleští uzavřete víčko nacházející se v kapalném dusíku a uložte do nádrže na kapalný dusík. Při rozmrazování pomocí kleští otevřete víčko nacházející se v kapalném dusíku a proveďte rozmrazovací práci.

Proces likvidace: Vzhledem k tomu, že by došlo ke kontaminaci následně použitého produktu, zlikvidujte jej správně v souladu se zákony a předpisy dané země.



REPROLIFE Inc.

2-5-3-9F Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo, 160-0022 Japan

Telefon: +81359258931

E-mail: contact@reprolife.jp URL produktu: <https://reprolife.jp/en>



MT Promedt Consulting GmbH

Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Německo

Telefon: +496894581020



IFU-004302, 02/09/2025 1/3


Upozornění:

- 1) Při sundávání a nasazování víčka dbejte na to, aby se list nedotýkal víčka
- 2) Pokud je obal roztržený nebo poškozený, nepoužívejte jej a zlikvidujte jej.
- 3) Celý proces s použitím Cryotec by měl být prováděn při pokojové teplotě.
- 4) Používat jej smí pouze odborník.


Opatření:

- 1) Produkty s poškozeným obalem nelze použít.
- 2) Pokud uplynulo datum platnosti, daný produkt nelze použít.
- 3) Toto zařízení používá pouze lékař s dovednostmi a zkušenostmi.
- 4) Toto zařízení je pouze pro jednorázové použití.

Vitrifikácia

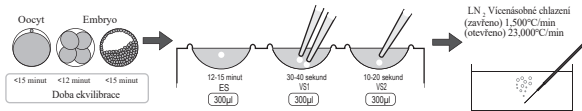

Zahřívání

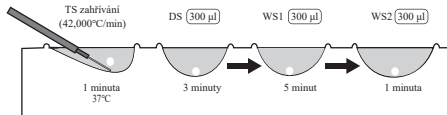

*Doporučuje se používat společně vitrifikační a zahřívací roztok a desky.

*Vitrifikační a zahřívací roztok nebo desky se jsou přepravovány samostatně.

Zkratky: PP (polypropylen), OPP (orientovaný polypropylen), ES (ekvilibrační roztok), VS1 (vitrifikační roztok 1), VS2 (vitrifikační roztok 2), TS (zahřívací roztok), DS (ředicí roztok), WS1 (promývací roztok 1), WS2 (promývací roztok 2), LN2 (kapalný dusík)

Symboly

Ne	Symbol	Popis	Ne	Symbol	Popis	Ne	SSymbol	Popis
1		Výrobce	7		Nepoužívat opětovně	13		Omezení teploty
2		Katalogové číslo	8		Nesterilizujte opětovně	14		Země výroby Vyrobeno v Japonsku
3		Zplnomocněný zástupce v EC	9		Sterilizováno ozařováním	15		Zdravotnický prostředek
4		Datum expirace	10		Prostudujte si návod k použití	16		Jednoduchý sterilní bariérový systém s ochranným vnějším obalem
5		Datum výroby	11		Označení CE schváleno DEKRA	17		Obsahuje nebo přítomnost
6		Kód šarže	12		Nepoužívejte, pokud je balení jednotky otevřené nebo poškozené	18		