

Pokyny pro uživatele týkající se tkáňových úložných desek

Preventivní opatření: Produkty s poškozeným obalem nelze použít. Pokud uplynulo datum platnosti, daný produkt nelze použít.

Upozornění při používání: Toto zařízení může používat pouze odborník, který absolvoval školení. Toto zařízení je pouze na jedno použití.

Upozornění při skladování: Zamezte šokům nebo tlaku, jako je pád nebo velká zátěž.

Hlavní materiál: Polystyren

Forma: Deska pro ukládání tkání

Model: VP 010 (10ks), WP 010 (10ks)

Balení: Primární balení: Vak OPP / sekundární balení: Vak OPP (pouze pro 10 kusů)

Sterilizace: Gamma sterilizováno

Teplota: Během skladování: 10°C ~ 25°C

Škladovatelnost: 2 roky po datu sterilizace.

Účel použití: K vitifikaci nebo zahřátí savčí buněk, tkáně, oocytu, embrya a blastocysty.

Návod k použití

Vitri destička: Otevřete vak a vyjměte destičku. Umístěte ji na stojan mikroskopu. Destička má 3 jamky na přední straně a drážku pro Cryotec na zadní straně. Sejměte víčko a naplňte jednotlivé jamky roztokem. Provádějte při pokojové teplotě.

Teplá destička: Otevřete vak, vyjměte destičku, nechte víčko zavěšené a umístěte ji do inkubátoru při 37 °C < 3 hodiny před použitím.

Vyjměte ji z inkubátoru a postavte ji (čtvercová jamka na levé straně) na stojan mikroskopu. Sejměte víčko a naplňte jednotlivé jamky roztokem.

Provádějte při pokojové teplotě.


Proces likvidace: Protože by došlo ke kontaminaci následně použitého produktu, zlikvidujte ji prosím správně v souladu se zákony a předpisy dané země.

REPROLIFE Inc.
2-5-3-9F Shinjuku Shinjuku-ku Tokyo, 160-0022 Japan Telefon: +81359258931
E-mail: contact@reprolife.jp URL produktu: <https://reprolife.jp/en>


EC REP MT Promedt Consulting GmbH
Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Německo
Telefon: +496894581020



Vitrifikace

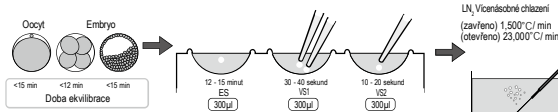

Zahřívání

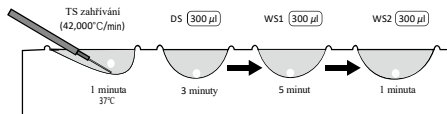

* Doporučuje se kombinované použití s vitrificačním a ohřívacím roztokem a Cryotec.

Zkratky: OPP (orientovaný polypropylen), ES (ekvilibrační roztok), VS1 (vitrificační roztok 1), VS2 (vitrificační roztok 2), TS (zahřívací roztok), DS (ředící roztok), WS1 (promývací roztok 1), WS2 (promývací roztok 2), LN2 (kapalný dusík)

Symbols

№	Symbol	Popis	№	Symbol	Popis	№	SSymbol	Popis
1		Výrobce	7		Nepoužívat opětovně	13		Omezení teploty
2		Katalogové číslo	8		Nesterilizujte opětovně	14		Země výroby Vyrobeno v Japonsku
3		Zplnomocněný zástupce v EC	9		Sterilizováno ozařováním	15		Zdravotnický prostředek
4		Datum expirace	10		Prostudujte si návod k použití	16		Jednoduchý sterilní bariérový systém s ochranným vnějším obalem
5		Datum výroby	11		Označení CE schváleno DEKRA	17		Obsahuje nebo přítomnost
6		Kód šarže	12		Nepoužívejte, pokud je balení jednotky otevřené nebo poškozené	18		