



Cryotec Brugervejledning

Hovedmateriale: Centraldel (Indhold: Polyethylenterephthalat 98%), filmark (Indhold: Polyethylenterephthalat $\geq 99\%$)

Form: Vævsopbevaring

Model: TEC 010Y, TEC 010B, TEC 010W, TEC 010R, TEC 010G

Emballage: Emballagens inderside: Gamma-resistent PP (polypropylen) / Emballagens yderside: OPP (Orienteret Polypropylen) taske

Sterilisering: Gamma steriliseret

Temperatur: Under opbevaring: 10 °C ~ 25 °C

Holdbarhed: 2 år efter steriliseringsdatoen.

Anvendelsesformål: Til sintring af pattedyrsceller, væv, oocytter, embryoner og blastocyster.

Brugsanvisning:

Tag hættten af, anbring cellerne på det gennemsigtige ark, så kryobeskyttelsen er infiltreret nok. Kom straks flydende nitrogen i for at fryse. Brug en pincet til at lukke hættten inde i det flydende nitrogen og opbevare det i beholderen med flydende nitrogen. Ved optøning åbnes hættten inde i det flydende nitrogen ved hjælp af en pincet, og optøning påbegyndes.

Bortskaffelsesproces: Da det allerede anvendte produkt kan være kontamineret, skal det bortskaffes korrekt i henhold til love og regler i det pågældende land.



REPROLIFE Inc.

2-5-3-9F Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo, 160-0022 Japan

Telefon: +81359258931

E-mail: contact@reprolife.jp Produkt URL: <https://reprolife.jp/en>



MT Promedt Consulting GmbH

Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Tyskland


Telefon: +496894581020



Bemærk:

- 1) Sørg for, at arket ikke kommer i kontakt med hættten, mens hættten tages af og sættes på.
- 2) Hvis emballagen er revet i stykker eller beskadiget, må indholdet ikke anvendes, men skal bortskaffes.
- 3) Hele processen med Cryotec skal udføres ved stuetemperatur.
- 4) Må kun anvendes af specialister.


Forglasning

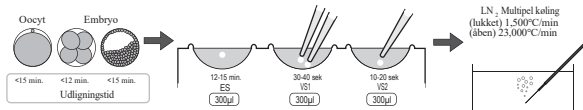

Forsigtig:

- 1) Produkter med beskadiget emballage bør ikke anvendes.
- 2) Hvis gyldighedsdatoen er overskredet, kan produktet ikke anvendes.
- 3) Denne enhed må kun anvendes af en læge med teknisk færdighed og erfaring.
- 4) Denne enhed er kun til engangsbrug.

Opvarmning

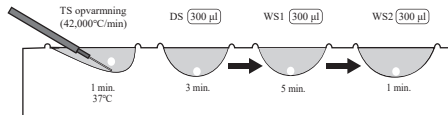

*Det anbefales at anvende forglasnings- og opvarmningsopløsning og plader sammen.

*Forglasnings- og opvarmningsopløsning eller plader kommer hver for sig.

Forkortelser: PP (Polypropylen), OPP (Orienteret polypropylen), ES (Ækvilibreringsopløsning), VS1 (Forglasningsopløsning 1), VS2 (Forglasningsopløsning 2), TS (Opvarmningsopløsning), DS (Fortyndingsopløsning), WS1 (Vaskeopløsning 1), WS2 (Vaskeopløsning 2), LN2 (flydende nitrogen)

Symboler

Nr.	Symbol	Beskrivelse	Nr.	Symbol	Beskrivelse	Nr.	SSymbol	Beskrivelse
1		Fabrikant	7		Må ikke genanvendes	13		Temperaturbegrænsning
2		Katalognummer	8		Må ikke resteriliseres	14		Fremstillingsland fremstillet i Japan
3		Autoriseret repræsentant i EU	9		Steriliseret med stråling	15		Medicinsk udstyr
4		Udløbsdato	10		Se brugsanvisningen	16		JEnkelt sterilt barriersystem med beskyttende emballering udvendigt
5		Fremstillingsdato	11		CE-mærkning godkendt af DEKRA	17		Indeholder eller tilstedeværelse af
6		Batchkode	12		Må ikke anvendes, hvis enhedspakningen er åbnet eller beskadiget	18		