

Brugervejledning til vævsopbevaringsplade

Forholdsregler: Produkter med beskadiget emballage bør ikke anvendes. Hvis gyldighedsdatoen er overskredet, kan produktet ikke anvendes.

Bemærk vedr. anvendelse: Denne enhed bør kun anvendes af en specialist, der har på et kursus er blevet oplært i brugen. Denne enhed er kun til engangsbrug.

Bemærk vedr. opbevaring: Undgå stød eller tryk, såsom at tabe og påføre meget belastning.

Hovedmateriale: Polystyren

Form: Vævsopbevaringsplade

Model: VP 010 (10 stk), WP 010 (10 stk)

Emballage: Primær pakning: OPP pose / sekundær pakning: OPP-pose (kun til 10 styk)

Sterilisering: Gamma steriliseret

Temperatur: Under opbevaring: 10°C~25°C

Holdbarhed: 2 år efter den steriliserede dato.

Anvendelsesformål: Til sintring eller opvarmning af en pattedyrscelle, væv, oocyt, embryo og blastocyst.

Brugsanvisning

Vitri-plade: Åbn en pose og tag pladen ud. Læg den på et mikroskopstativ. Pladen har 3 fordybninger på forsiden og en rende til Cryotec på bagsiden. Tag låget, og fyld hver fordybning med opløsninger. Udføres ved stuetemperatur.

Varm plade: Åbn en pose, tag pladen ud, hold låget lukket, og anbring den derefter i inkubatoren ved 37 °C < 3 timer før brug. Tag det ud af inkubatoren, og sæt det (en firkantet fordybning på venstre side) på mikroskopstativet. Tag låget, og fyld hver fordybning med opløsninger. Udføres ved stuetemperatur.


Bortskaffelsesproces: Da et allerede anvendt produkt kan være kontamineret, skal det bortskaffes korrekt i henhold til love og regler i det pågældende land.

REPROLIFE Inc.
2-5-3-9F Shinjuku Shinjuku-ku Tokyo, 160-0022 Japan Telephone: +81359258931
E-mail: contact@reprolife.jp Produkt URL: <https://reprolife.jp/en>


EC REP MT Promedt Consulting GmbH
Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Tyskland
Telefon: +496894581020



Forglasning

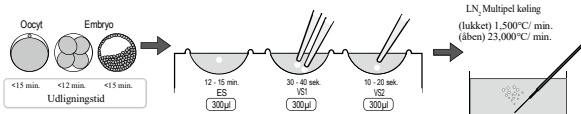

Opvarmning

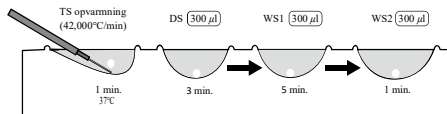

* Kombineret brug med forglasnings- og opvarmningsopløsning og Cryotec anbefales.

Forkortelser: OPP (Orienteret polypropylen), ES (Ækvilibreringsopløsning), VS1 (Foglasningsopløsning 1), VS2 (Foglasningsopløsning 2), TS (Opvarmningsopløsning), DS (Fortyndingsopløsning), WS1 (Vaskeopløsning 1), WS2 (Vaskeopløsning 2), LN2 (flydende nitrogen)

Symboler

Nr.	Symbol	Beskrivelse	Nr.	Symbol	Beskrivelse	Nr.	SSymbol	Beskrivelse
1		Fabrikant	7		Må ikke genanvendes	13		Temperaturbegrænsning
2		Katalognummer	8		Må ikke resteriliseres	14		Fremstillingsland fremstillet i Japan
3		Autoriseret repræsentant i EU	9		Steriliseret med stråling	15		Medicinsk udstyr
4		Udløbsdato	10		Se brugsanvisningen	16		JEnkelt sterilt barriersystem med beskyttende emballering uvendigt
5		Fremstillingsdato	11		CE-mærkning godkendt af DEKRA	17		Indeholder eller tilstedeværelse af
6		Batchkode	12		Må ikke anvendes, hvis enhedspakningen er åbnet eller beskadiget	18		