



Kullanıcılar için Cryotec Talimatları

Ana malzeme: Gövde(İçerik:Polietilen tereftalat %98), film tabakası (İçerik:Polietilen tereftalat $\geq$ %99)

Biçim: Doku Depolama

Model: TEC 010Y, TEC 010B, TEC 010W, TEC 010R, TEC 010G

Ambalaj: İç ambalaj: Gama dayanıklı PP (Polipropilen) / Dış ambalaj: OPP (Yönelimli Polipropilen) ambalaj

Sterilizasyon: Gama ile Sterilize

Sıcaklık: Saklama sırasında: 10°C~25°C

Raf ömrü: Sterilizasyon tarihinden itibaren 2 yıl.

Kullanım amacı: Memeli hücre, doku, oosit, embriyo ve blastosisti vitrifiye etmek.

Kullanım talimatları:

Kapağı çıkarın, hücreleri kriyoprotektan yeterince sızacak şekilde şeffaf tabaka üzerine yerleştirin. Hemen sıvı nitrojen içine koyup dondurun. Forseps kullanarak sıvı nitrojen içindeki kapağı kapatın ve sıvı nitrojen tankında saklayın. Çözme sırasında forseps kullanarak sıvı nitrojen içindeki kapağı açın ve çözme işlemini yapın.

İmha işlemi: Kullanım sonrası ürün kontamine olacağından, lütfen ülkenin yasa ve yönetmeliklerine göre uygun bir şekilde imha edin.



REPROLIFE Inc.

2-5-3-9F Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo, 160-0022 Japonya

Telefon: +81359258931

E-posta: contact@reprolife.jp Ürün URL'si: <https://reprolife.jp/en>



MT Promedt Consulting GmbH

Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Almanya

Telefon: +496894581020




Dikkat:

- 1) Kapağı çıkarırken ve takarken kağıt plakayı kapağa değmeyecek şekilde tutunuz.
- 2) Ambalaj yırtılmış veya hasarlı ise kullanmayınız ve imha etmeyiniz.
- 3) Cryotec'in kullanıldığı tüm işlem oda sıcaklığında gerçekleştirilmelidir.
- 4) Sadece uzmanların kullanmasına izin verilir.


Önlemler:

- 1) Ambalajı hasarlı ürünler kullanılamaz.
- 2) Geçerlilik tarihi geçmişse o ürün kullanılamaz.
- 3) Bu cihaz sadece teknik ve deneyime sahip bir doktor tarafından kullanılır.
- 4) Bu cihaz sadece tek kullanımlıktır.

Vitrifikasyon

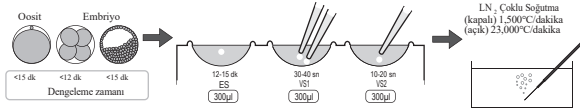

Isıtma

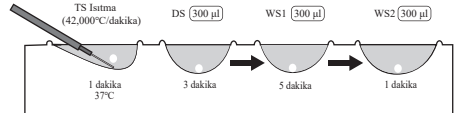

*Vitrifikasyon ve ısıtma solüsyonu ve plakalarının birlikte kullanılması tavsiye edilir.

*Vitrifikasyon ve ısıtma solüsyonu veya plakaları ayrı olarak taşınır.

Kısaltmalar: PP(Polipropilen), OPP(Yönlendirilmiş Polipropilen), ES(Dengeleme Solüsyonu), VS1(Vitrifikasyon solüsyonu 1), VS2(Vitrifikasyon solüsyonu 2), TS(Isıtma Solüsyonu), DS (Seyreltici Solüsyon), WS1(Yıkama Solüsyonu 1), WS2 (Yıkama Solüsyonu 2), LN2 (Sıvı Azot)

Semboller

No	Symbol	Tanım	No	Symbol	Tanım	No	SSymbol	Tanım
1		üretici firma	7		Yeniden kullanmayın	13		Sıcaklık sınırlaması
2		Katalog numarası	8		Yeniden sterilize etmeyin	14		Üretim Ülkesi Japonya'da üretilmiştir
3		Avrupa Yetkili Temsilcisi	9		Işınlama ile sterilize edilmiş	15		Tıbbi cihaz
4		Son kullanma tarihi	10		Kullanım talimatlarına bakın	16		Dışında koruyucu ambalaj bulunan tekli steril bariyer sistemi
5		Üretim tarihi	11		CE işareti DEKRA tarafından onaylandı	17		İçerir veya varlığı
6		Parti kodu	12		Birim ambalajı açılmış veya hasarlıysa kullanmayın	18		