

Kullanıcılar için Doku Saklama Plakası Talimatları

Önemler : Ambalajı hasarlı ürünler kullanılamaz. Geçerlilik tarihi geçmişse o ürün kullanılamaz.

Kullanım sırasında dikkat edilmesi gerekenler: Bu cihaz yalnızca eğitim kursu almış bir uzman tarafından kullanılabilir. Bu cihaz sadece tek kullanımlıdır.

Depolama sırasında dikkat edilmesi gerekenler: Düşürmeyiniz ve çok yük uygulamak gibi şok veya basınçtan kaçınınız.

Ana malzeme: Polistiren

Biçim: Doku Saklama Plakası

Modeli: VP 010 (10 adet), WP 010 (10 adet)

Ambalaj: Birincil paket: OPP ambalajı / İkincil paket: OPP ambalajı (sadece 10 parça için)

Sterilizasyon: Gama Sterilize Edilmiş

Sıcaklık: Depolama sırasında: 10°C~ 25°C

Raf ömrü: Sterilizasyon tarihinden itibaren 2 yıl.

Kullanım Amacı: Bir memeli hücrelerini, dokusunu, oosit, embriyosunu ve blastosisti vitrifiye etmek veya ısıtmak.

Kullanım talimatları

Vitri Plakası: Herhangi bir ambalajı açın ve plakayı çıkarın. Mikroskop standına koyun. Plakanın ön tarafında 3 adet kuyu ve arka tarafında Cryotec için bir hendek bulunur. Kapağı alın ve her bir kuyuyu solüsyonlarla doldurun. İşlemleri oda sıcaklığında gerçekleştirin.

Sıcak Plaka: Herhangi bir poşeti açın, plakayı çıkarın, kapağı kapalı tutun ve kullanmadan önce 37°C'de < 3 saat koşulluyla inkübatöre yerleştirin. Inkübatörden çıkarın ve mikroskop standına (sol tarafta kare bir kuyuya) yerleştirin. Kapağı alın ve her bir kuyuyu solüsyonlarla doldurun.

İşlemleri oda sıcaklığında gerçekleştirin.


İmha Süreci: Kullanım sonrası ürün kontamine olacağından, lütfen ülkenin yasa ve yönetmeliklerine göre uygun bir şekilde imha edin.

REPROLIFE Inc.
2-5-3-9F Shinjuku Shinjuku-ku Tokyo, 160-0022 Japonya Telefon: +81359258931
E-posta: contact@reprolife.jp Ürün URL'si: https://reprolife.jp/en


ECREP MT Promedt Consulting GmbH
Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Almanya
Telefon: +496894581020

CE
0344

Vitrifikasyon

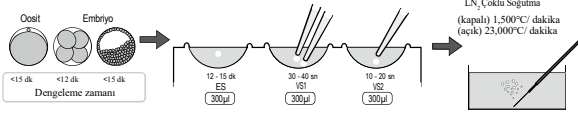

Isıtma

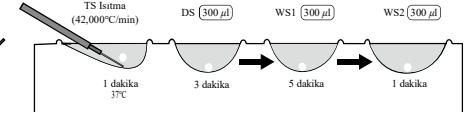

* Vitrifikasyon ve ısıtma solüsyonunun, Cryotec ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.

Kısaltmalar: OPP(yönlennmiş polipropilen), ES(Dengeleme Solüsyonu), VS1(Vitrifikasyon solüsyonu 1), VS2(Vitrifikasyon solüsyonu 2), TS(Isıtma Solüsyonu), DS (Seyreltici Solüsyon), WS1(Yıkama Solüsyonu 1), WS2 (Yıkama Solüsyonu 2), LN2 (Sıvı Azot)

Semboller

No	Sembol	Tanım	No	Sembol	Tanım	No	Sembol	Tanım
1		Üretici firma	7		Yeniden kullanmayın	13		Sıcaklık sınırlaması
2		Katalog numarası	8		Yeniden sterilize etmeyin	14		Üretim Ülkesi Japonya'da üretilmiştir
3		Avrupa Yetkili Temsilcisi	9		Işınlama ile sterilize edilmiş	15		Tıbbi cihaz
4		Son kullanma tarihi	10		Kullanım talimatlarına bakın	16		Dışında koruyucu ambalaj bulunan tekli steril bariyer sistemi
5		Üretim tarihi	11		CE işareti DEKRA tarafından onaylandı	17		İçerik veya varlığı
6		Parti kodu	12		Birim ambalajı açılmış veya hasarlıysa kullanmayın	18		