



Cryotec-instruksjoner for brukere

Hovedmateriale: Hoveddel (Innhold: Polyetylentereftalat 98%), filmark (Innhold: Polyetylentereftalat $\geq 99\%$)

Form: Vevslagring

Modell: TEC 010Y, TEC 010B, TEC 010W, TEC 010R, TEC 010G

Emballasje: Innvendig pakke: Gamma-bestendig PP (polypropylen) / Utvendig emballasje: OPP (orientert polypropylen) pose

Sterilisering: Gamma sterilisert

Temperatur: Under lagring: 10°C ~ 25°C

Holdbarhet: 2 år etter sterilisert dato.

Bruksformål: Å vitrifiere pattedyrceller, vev, oocytter, embryo og blastocyst.

Instruksjoner for bruk:

Ta av hetten, plasser celler på det gjennomsiktige arket slik at kryobeskyttelsesmiddelet er nok infiltrert. Sett umiddelbart inn flytende nitrogen for å fryse. Bruk tangen, lukk lokket inne i det flytende nitrogenet og oppbevar i tanken med flytende nitrogen. Bruk tangen, åpne lokket inne i det flytende nitrogenet, når det skal tines.

Avhendingsprosess: Siden det etterbrukte produktet kan være forurensset, vennligst kast på riktig måte i henhold til landets lover og forskrifter



REPROLIFE Inc.

2-5-3-9F Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo, 160-0022 Japan

Telefon: +81359258931

E-post: contact@reprolife.jp Produkt URL: <https://reprolife.jp/en>



MT Promedt Consulting GmbH

Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Tyskland

Telefon: +496894581020




Merk følgende :

- 1) Pass på at arket ikke berører hetten mens du tar av hetten og setter den på.
- 2) Bruk ikke pakken hvis den er revet i stykker eller skadet, men kast den.
- 3) Hele prosessen med Cryotec bør utføres under romtemperatur.
- 4) Må kun brukes av en spesialist.


Forholdsregler:

- 1) Produkter med skadet pakke kan ikke brukes.
- 2) Hvis gyldighetsdatoen passerte, kan ikke produktet brukes.
- 3) Denne enheten kan kun brukes av en lege med teknisk viten og erfaring.
- 4) Denne enheten er kun for engangsbruk.

Forglasning

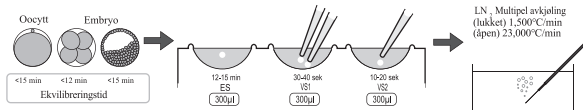

Oppvarming

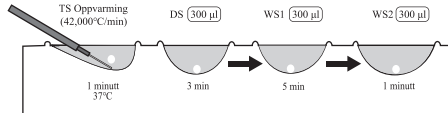

*Det anbefales å bruke vitrifikasjons- og oppvarmingsløsning og plater sammen.

*Vitrifikasjons- og oppvarmingsløsning eller plater bæres separat.

Forkortelser: PP (polypropylen), OPP (orientert polypropylen), ES (ekvibreringsløsning), VS1(vitrifikasjonsløsning 1), VS2(vitrifikasjonsløsning 2), TS (oppvarmingsløsning), DS (fortynningsløsning), WS1 (vaskeløsning 1), WS2 (vaskeløsning 2), LN₂ (flytende nitrogen)

Symboler

Nr.	Symbol	Beskrivelse	Nr.	Symbol	Beskrivelse	Nr.	SSymbol	Beskrivelse
1		Produsent	7		Må ikke gjenbrukes	13		Temperaturbegrensning
2		Katalognummer	8		Må ikke resteriliseres	14		Produksjonsland Produsert i Japan
3		Autorisert representant i EF	9		Sterilisert ved hjelp av bestråling	15		Medisinsk utstyr
4		Utløpsdato	10		Se bruksanvisningen	16		System med enkel steril barriere med beskyttende ytre emballasje
5		Produksjonsdato	11		CE-merking godkjent av DEKRA	17		Inneholder eller har forekomst av
6		Batchkode	12		Ikke bruk hvis enhetspakken er åpnet eller skadet	18		