

Bruksinstruksjoner for oppbevaringsplate for vev

Forholdsregler: Produkter med skadet pakke kan ikke brukes. Hvis gyldighetsdatoen har passert, kan ikke produktet brukes.
Oppmerksomhet under bruk: Denne enheten kan kun brukes av en spesialist som har tatt et kurs. Denne enheten er kun til engangsbruk.
Oppmerksomhet under lagring: Unngå støt eller trykk som å falle og påføre mye belastning.

Hovedmateriale: Polystyren

Form: Oppbevaringsplate for vev

Modell: VP 010 (10 stk), WP 010 (10 stk)

Emballasje: Primærpakke: OPP-pose / Sekundærpakke: OPP-pose (kun for 10 stykker)

Sterilisering: Gamma sterilisert

Temperatur: Under lagring: 10°C~25°C

Holdbarhet: 2 år etter sterilisert dato.

Bruksformål: For å forglasne eller varme opp en pattedyrce, vev, oocyt, embryo og blastocyst.

Bruksanvisning

Vitri-plate: Åpne en pose og ta platen ut. Sett den på et mikroskopstativ. Platen har 3 fordypinger på forsiden og en rille for Cryotec på baksiden. Ta lokket, og fyll hver fordyping med løsninger. Gjennomfør ved romtemperatur.

Varm tallerken: Åpne en pose, ta platen ut, hold et lokk lukket, og plasser den deretter i inkubatoren ved 37°C < 3 timer før bruk. Ta den ut av inkubatoren, og sett den (en firkantet fordyping på venstre side) på mikroskopstativet. Ta lokket, og fyll hver fordyping med løsninger. Gjennomfør ved romtemperatur.


Avhengingsprosess: Siden det etterbrukte produktet vil være forurensset, vennligst kassere på riktig måte i henhold til landets lover og forskrifter.

REPROLIFE Inc.
 2-5-3-9F Shinjuku Shinjuku-ku Tokyo, 160-0022 Japan Telefon: +81359258931
 E-post: contact@reprolife.jp Produkt URL: <https://reprolife.jp/en>


EC REP MT Promedt Consulting GmbH
 Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Tyskland
 Telefon: +496894581020



Forglasning

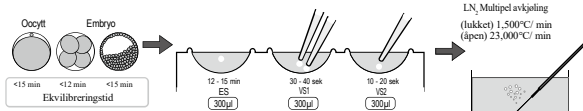

Oppvarming

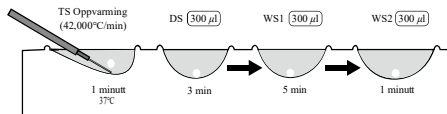

* Kombinert bruk med forglasning og oppvarmingsløsning, og Cryotec anbefales.

Forkortelser: OPP (orientert polypropylen), ES (ekvilibreringsløsning), VSI (vitifikasjonsløsning 1), VS2 (vitifikasjonsløsning 2), TS (oppvarmingsløsning), DS (fortynningsløsning), WS1 (vaskeløsning 1), WS2 (vaskeløsning 2), LN2 (flytende nitrogen)

Symboler

Nr.	Symbol	Beskrivelse	Nr.	Symbol	Beskrivelse	Nr.	SSymbol	Beskrivelse
1		Produsent	7		Må ikke gjenbrukes	13		Temperaturbegrensning
2		Katalognummer	8		Må ikke resteriliseres	14		Produksjonsland Produsert i Japan
3		Autorisert representant i EF	9		Sterilisert ved hjelp av bestråling	15		Medisinsk utstyr
4		Utløpsdato	10		Se bruksanvisningen	16		System med enkel steril barriere med beskyttende ytre emballasje
5		Produksjonsdato	11		CE-merking godkjent av DEKRA	17		Inneholder eller har forekomst av
6		Batchkode	12		Ikke bruk hvis enhetspakken er åpnet eller skadet	18		