



Cryotec használati utasítás

Fő anyag: Főrész (alapanyag: polietilén-tereftalát 98%), fólialap (alapanyag: polietilén-tereftalát $\geq 99\%$)

Alak: Szövegtároló

Modell: TEC 010Y, TEC 010B, TEC 010W, TEC 010R, TEC 010G

Csomagolás: Belső csomagolás: Gamma-ellenálló PP (polipropilén) / Külső csomagolás: OPP (Orientált polipropilén) zacskó

Sterilizálás: Gamma sterilizált

Hőmérséklet: Tárolás közben: 10°C ~ 25°C

Felhasználhatósági idő: a sterilizálás dátuma után 2 év.

Felhasználási cél: Emlőssejtek, szövetek, petesejtek, embriók és blasztociszták vitrifikációja.

Használati utasítás:

Vegye le a kupakot, helyezze a sejteket az átlátszó lapra úgy, hogy a krioprotektáns kellőképpen beszívárogjon. Azonnal tegye folyékony nitrogénbe, hogy megfagyjon. A csipesz segítségével zárja le a kupakot a folyékony nitrogénben, majd tárolja folyékony nitrogén tartályban. A felolvasztáskor a csipesz segítségével nyissa ki a folyékony nitrogénben lévő kupakot, majd végezze el a kiolvasztási folyamatot.

Ártalmatlanítási folyamat: Mivel a használatot követően a termék szennyezett lesz, kérjük, ártalmatlanítsa az adott ország törvényeinek és előírásainak megfelelően.



REPROLIFE Inc.

2-5-3-9F Shinjuku, Shinjuku-ku Tokió, 160-0022 Japán

Telefon: +81359258931

E-mail: contact@reprolife.jp Termék URL: <https://reprolife.jp/en>



MT Promedt Consulting GmbH

Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Németország

Telefon: +496894581020




IFU-005302, 02/09/2025 1/3

Figyelem :

- 1) A kupak levétele és felhelyezése közben ügyeljen rá, hogy a lap ne érjen hozzá a kupakhoz.
- 2) Ha a csomagolás szakadt vagy sérült, ne használja fel, és dobja ki.
- 3) A Cryotec teljes felhasználási folyamatát szobahőmérsékleten kell végrehajtani.
- 4) Csak szakember használhatja.

Vitrifikáció

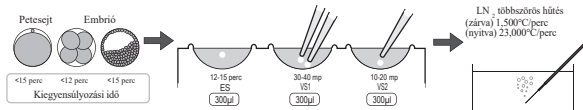

*Vitrifikációs és melegítő oldat illetve lemezek használata javasolt.


*A vitrifikációs és melegítő oldatot vagy a lemezeket külön szállítjuk.

Rövidítések: PP (polipropilén), OPP (orientált polipropilén), ES (kiegyenlítő oldat), VS1 (1. vitrifikációs oldat), VS2 (2. vitrifikációs oldat), TS (melegítő oldat), DS (hígító oldat), WS1 (1. mosóoldat), WS2 (2. mosóoldat), LN2 (folyékony nitrogén)

Óvintézkedés:

- 1) Sérült csomagolású termékek nem használhatók fel.
- 2) Ha a szavatossági idő lejárt, a termék nem használható fel.
- 3) Ezt az eszközt csak technikai tudással és tapasztalattal rendelkező orvos használhatja.
- 4) Ez az eszköz csak egyszeri használatra szolgál.

Melegítés

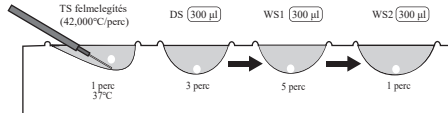

Szimbólumok

Sorszám	Szimbólum	Leírás	Sorszám	Szimbólum	Leírás	Sorszám	Szimbólum	Leírás
1		Gyártó	7		Ne használja újra	13		Hőmérséklet-korlátozás
2		Katalógusszám	8		Ne sterilizálja újra	14		Gyártási ország Japánban gyártva
3		Meghatalmazott képviselő az EK-ban	9		Sugárzással sterilizálva	15		Orvostechnikai eszköz
4		Lejárat dátum	10		Lásd a használati utasítást	16		Egyszeres sterilgát-rendszer kívül védőcsomagolással
5		Gyártási dátum	11		CE-jelölés a DEKRA által jóváhagyva	17		Tartalmaz, illetve jelenléte
6		Tételkód	12		Ne használja, ha az egységcsomagolás fel van nyitva vagy sérült	18		