

A szövettároló lemez használati útmutatója

Övintézkedés: A sérült csomagolású termékek nem használhatók fel. Ha az szavatossági idő lejárt, a termék nem használható fel.

Használat közbeni figyelmeztetések: Ezt az eszközt csak olyan szakember használhatja, aki részt vett egy tanfolyamon. Ez az eszköz csak egyszeri használatra szolgál.

Tárolással kapcsolatos figyelmeztetések: Kerülje el az ütést vagy nyomást, például a leejtést és a nagy terhelést.

Fő alapanyag: Polisztirol

Alak: Szövettároló lemez

Modell: VP 010 (10db), WP 010 (10db)

Csomagolás: Elsődleges csomagolás: OPP zacskó / másodlagos csomagolás: OPP zacskó (csak 10 darabhoz)

Szterilizáció: Gamma szterilizált

Hőmérséklet: Tárolás közben: 10°C ~ 25°C

Szavatossági idő: a szterilizálás dátuma után 2 év.

Felhasználási cél: Emlősejtek, szövetek, petesejtek, embriók és blasztociszták vitrificációja vagy melegítése.

Használati utasítás

Vitri lemez: Nyisson ki egy zacskót, és vegye ki a lemezt. Tegye egy mikroszkóp állványra. A lemez elülső oldalán 3 üreg található, hátul pedig egy Cryotec számára kialakított árok. Vegye le a fedelet, és tölts meg mindegyik üreget oldatokkal. Szobahőmérsékleten végezze el.

Meleg lemez: Nyissa ki a zacskót, vegye ki a lemezt, tartsa zárva a fedelet, majd helyezze az inkubátorba több, mint 37°C fokon 3 órával a felhasználás előtt. Vegye ki az inkubátorból, és tegye azt (egy négyzet alakú üreg a bal oldalon) a mikroszkóp állványra. Vegye le a fedelet, és tölts meg mindegyik üreget oldatokkal.

Szobahőmérsékleten végezze el.


Ártalmatlanítási folyamat: Mivel a használatot követően a termék szennyezett lesz, kérjük, ártalmatlanítsa az adott ország törvényeinek és előírásainak megfelelően.

REPROLIFE Inc.
2-5-3-9F Shinjuku Shinjuku-ku Tokió, 160-0022 Japán Telefon: +81359258931
E-mail: contact@reprolife.jp Termék URL: <https://reprolife.jp/en>


ECREP MT Promedt Consulting GmbH
Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Németország
Telefon: +496894581020

CE
0344

Vitrifikáció

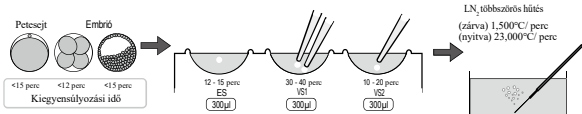

Melegítés

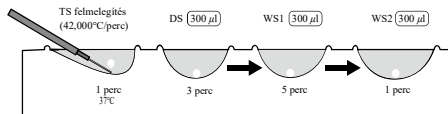

*Vitrifikációs és melegítő oldattal kombinálva, valamint a Cryotec használata javasolt.

Rövidítések: OPP (orientált polipropilén), ES (kiegénylítő oldat), VS1 (1. vitrificációs (üvegesítő) oldat), VS2 (2. vitrificációs (üvegesítő) oldat), TS (melegítő oldat), DS (hígító oldat), WS1 (1. mosóoldat), WS2 (2. mosóoldat), LN2 (folyékony nitrogén)

Szimbólumok

Sorszám	Szimbólum	Leírás	Sorszám	Szimbólum	Leírás	Sorszám	Szimbólum	Leírás
1		Gyártó	7		Ne használja újra	13		Hőmérséklet-korlátozás
2		Katalógusszám	8		Ne sterilizálja újra	14		Gyártási ország Japánban gyártva
3		Meghatalmazott képviselő az EK-ban	9		Sugárzással sterilizálva	15		Orvostechnikai eszköz
4		Lejárat dátum	10		Lásd a használati utasítást	16		Egyszeres steriligát-rendszer kívül védőcsomagolással
5		Gyártási dátum	11		CE-jelölés a DEKRA által jóváhagyva	17		Tartalmaz, illetve jelenléte
6		Tételkód	12		Ne használja, ha az egységcsomagolás fel van nyitva vagy sérült	18		