



Cryotec-ohjeet käyttäjille

Päämateriaali: Runko (sisältö: polyeteenitereftalaatti 98 %), kalvovevy (sisältö: polyeteenitereftalaatti ≥ 99 %)

Tyyppi: Kudoksen säilytys

Malli: TEC 010Y, TEC 010B, TEC 010W, TEC 010R, TEC 010G

Pakkaus: Sisäpakkaus: Gammasäteilyä kestävä PP (polypropeeni) / Ulkopakkaus: OPP (orientoitu polypropeeni) -pussi

Sterilointi: Gammasteriloitu

Lämpötila: Varastoinnin aikana: 10 °C–25 °C

Säilyvyys: 2 vuotta steriloitipäivästä.

Käyttötarkoitus: Nisäkkään solun, kudoksen, munasolun, alkion ja alkiorakkulan vitrifikaatioon.

Käyttöohjeet:

Ota korkki pois, aseta solut läpinäkyvälle kalvolle niin, että kylmäsuojaliuosta tunkeutuu niihin riittävästi. Laita välittömästi nestemäiseen tyypeen jäätymään. Sulje nestemäisessä tyyppessä oleva korkki pihdeillä ja säilö nestetyyppisäiliöön. Sulatettaessa avaa nestemäisessä tyyppessä oleva korkki pihdeillä ja suorita sulatus.

Hävitysprosessi: Koska käytetty tuote on epäpuhdas, hävitä se asianmukaisesti maan lakien ja määräysten mukaisesti.



REPROLIFE Inc.

2-5-3-9F Shinjuku, Shinjuku-ku Tokio, 160-0022 Japan

Puh: +81359258931

Sähköposti: contact@reprolife.jp Tuotteen URL-osoite: <https://reprolife.jp/en>



MT Promedt Consulting GmbH

Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Saksa

Puh: +496894581020




Huomio:

- 1) Älä anna kalvon koskettaa korkkia, kun otat korkin pois ja pistät sen kiinni.
- 2) Jos pakkaus on repeytynyt tai vaurioitunut, älä käytä tuotetta, vaan hävitä se.
- 3) Koko prosessi, jossa käytetään Cryotecia, tulee suorittaa huoneenlämmössä.
- 4) Vain asiantuntija saa käyttää sitä.


Varotoimet:

- 1) Tuotteita, joiden pakkaus on vaurioitunut, ei saa käyttää.
- 2) Jos voimassaoloaika on päättynyt, tuotetta ei saa käyttää.
- 3) Tämä laite on vain tekniikan hallitsevan ja kokeneen lääkärin käyttöön.
- 4) Tämä laite on kertakäyttöinen.

Vitrifikaatio

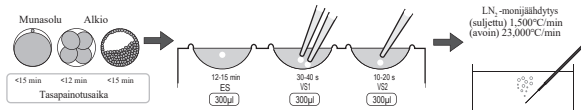

Lämmitys

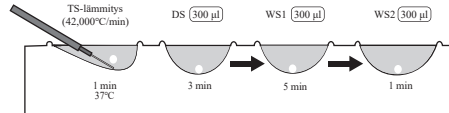

*Vitrifikaatio- ja lämmitysluosta ja -levyjä suositellaan käytettäväksi yhdessä.

*Vitrifikaatio- ja lämmitysluos tai -levyt kuljetetaan erikseen.

Lyhenteet: PP (polypropeeni), OPP (orientoitu polypropeeni), ES (tasapainotusliuos), VS1 (vitrifikaatioliuos 1), VS2 (vitrifikaatioliuos 2), TS (lämmitysluos), DS (laimennusliuos), WS1 (pesuliuos 1), WS2 (pesuliuos 2), LN2 (nestemäinen typpi)

Symbolit

Nro	Symboli	Kuvaus	Nro	Symboli	Kuvaus	Nro	Symboli	Kuvaus
1		Valmistaja	7		Älä käytä uudelleen	13		Lämpötilarajoitus
2		Luettelonumero	8		Älä steriloi uudelleen	14		Valmistusmaa Japanissa valmistettu
3		Valtuutettu edustaja Euroopassa	9		Steriloitu säteilyttämällä	15		Lääkinnällinen laite
4		Viimeinen käyttöpäivä	10		Tutustu käyttöohjeisiin	16		Yksinkertainen steriili pakkaus, jonka päällä on suojapakkaus
5		Valmistuspäivä	11		DEKRA:n hyväksymä CE-merkintä	17		Sisältää tai esiintyminen
6		Eränumero	12		Älä käytä, jos pakkaus on avattu tai vaurioitunut	18		