

Kudosten säilytyslevyn käyttöohjeet

Varotoimet : Tuotteita, joiden pakkaus on vaurioitunut, ei saa käyttää. Jos voimassaoloaika on päättynyt, tuotetta ei saa käyttää.

Huomioi käyttäessä: Tätä laitetta tulee käyttää vain koulutuksen suorittanut asiantuntija. Tämä laite on kertakäyttöinen.

Huomioi varastoidessa: Vältä iskuja tai painetta, kuten pudottamista ja suurta kuormitusta.

Päämateriaali: Polystyreeni

Tyyppi: Kudosten säilytyslevy

Malli: VP 010 (10 kpl), WP 010 (10 kpl)

Pakkaus: Ensijainen pakkaus: OPP-pussi / Toissijainen paketti: OPP-pussi (vain 10 kappaleelle)

Sterilointi: Gammasteriloitu

Lämpötila: Säilytyksen aikana: 10 °C–25 °C

Säilyvyys: 2 vuotta steriloitipäivästä.

Käyttötarkoitus: Nisäkkään solun, kudoksen, munasolun, alkion ja alkiorakkulan vitrifikaatioon tai lämmitykseen.

Käyttöohjeet

Vitri-levy: Avaa pussi ja ota levy ulos. Aseta se mikroskooppitelineeseen. Levyssä on 3 syvennystä etupuoella ja liuska Cryotecille takapuolella. Ota kansi ja täytä jokainen syvennys liuoksilla. Suorita toimenpide huoneenlämmössä.

Lämmityslevy: Avaa pussi, ota levy ulos, pidä kansi suljettuna ja aseta inkubaattoriin 37 °C:ssa < 3 tuntia ennen käyttöä. Ota levy ulos inkubaattorista ja aseta (neliömäinen syvennys vasemmalla puolella) mikroskooppitelineeseen. Ota kansi ja täytä jokainen syvennys liuoksilla.

Suorita toimenpide huoneenlämmössä.


Hävitysprosessi: Koska käytetty tuote on epäpuhdas, hävitä se asianmukaisesti maan lakien ja määräysten mukaisesti.

REPROLIFE Inc.
2-5-3-9F Shinjuku Shinjuku-ku Tokio, 160-0022 Japan Puh.: +81359258931
Sähköposti: contact@reprolife.jp Tuotteen URL-osoite: https://reprolife.jp/en


ECREP MT Promedt Consulting GmbH
Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Saksa
Puh.: +496894581020

CE
0344

Vitrifikaatio

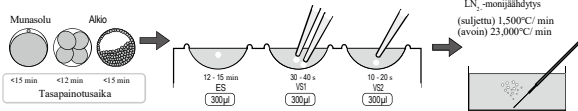

Lämmitys

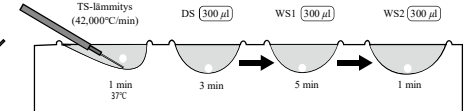

*Yhdistetty käyttö vitrifikaatio- ja lämmitysliuoksen sekä Cryotecin kanssa on suositeltavaa.

Lyhenteet: OPP (orientoitu polypropeeni), ES (tasapainotusliuos), VSI (vitrifikaatioliuos 1), VS2 (vitrifikaatioliuos 2),

TS (lämmitysliuos), DS (laimennusliuos), WSI (pesuliuos 1), WS2 (pesuliuos 2), LN2 (nestemäinen typi)

Symbolit

Nro	Symboli	Kuvaus	Nro	Symboli	Kuvaus	Nro	Symboli	Kuvaus
1		Valmistaja	7		Älä käytä uudelleen	13		Lämpötilarajoitus
2		Luettelonumero	8		Älä steriloitu uudelleen	14		Valmistusmaa Japanissa valmistettu
3		Valtuutettu edustaja Euroopassa	9		Steriloitu säteilyttämällä	15		Lääkinnällinen laite
4		Viimeinen käyttöpäivä	10		Tutustu käyttöohjeisiin	16		Yksinkertainen steriili pakkaus, jonka päällä on suojapakkaus
5		Valmistuspäivä	11		DEKRAn hyväksymä CE-merkintä	17		Sisältää tai esiintymisen
6		Eränumero	12		Älä käytä, jos pakkaus on avattu tai vaurioitunut	18		