



Instructions d'utilisation de Cryotec

Matériau principal : Corps du dispositif (contient : polyéthylène téréphtalate 98 %), feuille de pellicule plastique (contient : polyéthylène téréphtalate $\geq$ 99 %)

Forme : Dispositif de conservation de tissus

Modèle : TEC 010Y, TEC 010B, TEC 010W, TEC 010R, TEC 010G

Conditionnement : Emballage interne : PP (polypropylène) résistant aux rayons gamma / Emballage externe : sac en OPP (polypropylène orienté)

Stérilisation : Stérilisé par rayonnement gamma

Température : Durant l'entreposage : 10 °C - 25 °C

Durée de conservation : 2 ans après la date de stérilisation

Fins d'utilisation : Vitrification de cellules, tissus, ovocytes, embryons et blastocystes de mammifères

Mode d'emploi :

Retirer le bouchon, placer les cellules sur la feuille transparente de manière que le cryoprotecteur soit convenablement infiltré. Insérer immédiatement dans l'azote liquide pour congeler. Fermer le bouchon dans l'azote liquide à l'aide d'une pince stérile et entreposer dans un réservoir d'azote liquide. Au moment de la décongélation, ouvrir le bouchon dans l'azote liquide à l'aide d'une pince stérile et procéder à la décongélation.

Procédure d'élimination : Le produit après utilisation étant contaminé, veuillez l'éliminer de façon appropriée, conformément aux lois et réglementations du pays.



REPROLIFE Inc.

2-5-3-9F Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo, 160-0022 Japon

Téléphone: +81359258931

Courriel: contact@reprolife.jp URL du produit : <https://reprolife.jp/en>



MT Promedt Consulting GmbH

Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Allemagne


Téléphone: +496894581020



Mises en garde :

- 1) S'assurer que la feuille ne touche pas le bouchon lors du retrait ou de la mise en place de ce dernier.
- 2) Si l'emballage est déchiré ou endommagé, ne pas utiliser le dispositif et le jeter.
- 3) L'ensemble du processus utilisant Cryotec doit être réalisé à température ambiante.
- 4) Seul un spécialiste est autorisé à utiliser le dispositif.


Vitrification

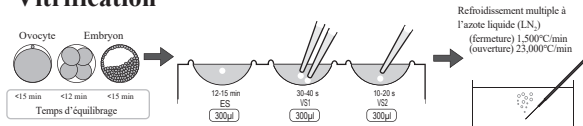

Précautions:

- 1) Les produits dont l'emballage est endommagé ne peuvent pas être utilisés.
- 2) Si la date de validité est dépassée, le produit ne peut pas être utilisé.
- 3) Ce dispositif ne peut être utilisé que par un médecin disposant de l'expertise et de l'expérience nécessaires.
- 4) Il s'agit d'un dispositif à usage unique.

Réchauffement

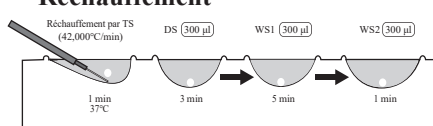

* Il est recommandé d'utiliser les solutions et plaques de vitrification et de réchauffement ensemble.

* Les solutions ou plaques de vitrification et de réchauffement sont transportées séparément.

Abréviations: PP (polypropylène), OPP (polypropylène orienté), ES (solution d'équilibre), VS1 (solution de vitrification 1), VS2 (solution de vitrification 2), TS (solution de réchauffement), DS (solution diluante), WS1 (solution de lavage 1), WS2 (solution de lavage 2), LN2 (azote liquide)

Symboles

N°	Symbole	Description	N°	Symbole	Description	N°	Symbole	Description
1		Fabricant	7		Ne pas réutiliser	13		Limites de température
2		Numéro de catalogue	8		Ne pas restériliser	14		Pays de fabrication Fabriqué au Japon
3		Représentant autorisé de la Communauté Européenne	9		Stérilisé par irradiation	15		Dispositif médical
4		Date de péremption	10		Consulter le mode d'emploi	16		Système à barrière stérile simple avec emballage extérieur de protection
5		Date de fabrication	11		Marquage CE approuvé par DEKRA	17		Contient ou présence de
6		Code de lot	12		Ne pas utiliser si l'emballage unitaire est ouvert ou endommagé	18		