



Instructions d'utilisation des plaques de conservation de tissus

Précautions : Les produits dont l'emballage est endommagé ne peuvent pas être utilisés. Si la date de validité est dépassée, le produit ne peut pas être utilisé.

Mises en garde sur l'utilisation : Ce dispositif ne peut être utilisé que par un spécialiste ayant suivi une formation. Il s'agit d'un dispositif à usage unique.

Mises en garde sur la conservation : Éviter les chocs ou les pressions, telles que les chutes du dispositif ou l'application d'une charge importante.

Matériau principal : Polystyrène

Forme : Plaque de conservation de tissus

Modèle : VP 010 (10 unités), WP 010 (10 unités)

Conditionnement : Emballage principal : sac en OPP / Emballage secondaire : sac en OPP (pour 10 unités uniquement)

Sterilisation : Stérilisées par rayonnement gamma

Température : Durant l'entreposage : 10 °C - 25 °C

Durée de conservation : 2 ans après la date de stérilisation

Fins d'utilisation : Vitrification ou réchauffement de cellules, tissus, ovocytes, embryons et blastocystes de mammifères

Mode d'emploi

Plaque de vitrification : Ouvrir un sac et en sortir la plaque. La déposer sur un support de microscope. La plaque comporte 3 puits sur la face avant et un creux pour le Cryotec sur la face arrière. Soulever le couvercle et remplir chaque puits de solution. Procéder à température ambiante.

Plaque de réchauffement : Ouvrir un sac, en sortir la plaque tout en conservant le couvercle fermé, puis la placer dans un incubateur à 37 °C < 3 heures avant son utilisation. La sortir de l'incubateur et la placer (avec un puits carré disposé sur le côté gauche) sur le support du microscope. Soulever le couvercle et remplir chaque puits de solution. Procéder à température ambiante.


Procédure d'élimination : Le produit après utilisation étant contaminé, veuillez l'éliminer de façon appropriée, conformément aux lois et réglementations du pays.

REPROLIFE Inc.
2-5-3-9F Shinjuku Shinjuku-ku Tokyo, 160-0022 Japon Téléphone: +81359258931
Courriel: contact@reprolife.jp URL du produit : <https://reprolife.jp/en>


ECREP MT Promedt Consulting GmbH
Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Allemagne
Téléphone: +496894581020



Vitrification

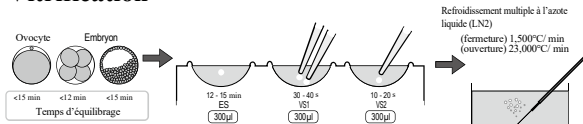

Réchauffement

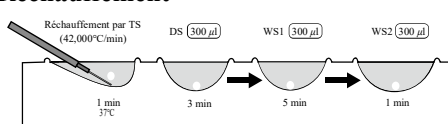

* Une utilisation combinée avec une solution de vitrification et de réchauffement, ainsi qu'avec Cryotec, est recommandée

Abréviations : OPP (polypropylène orienté), ES (solution d'équilibrage), V1 (solution de vitrification 1), V2 (solution de vitrification 2), TS (solution de réchauffement), DS (solution diluante), WS1 (solution de lavage 1), WS2 (solution de lavage 2), LN2 (azote liquide)

Symboles

N°	Symbole	Description	N°	Symbole	Description	N°	Symbole	Description
1		Fabricant	7		Ne pas réutiliser	13		Limites de température
2		Numéro de catalogue	8		Ne pas resteriliser	14		Pays de fabrication Fabriqué au Japon
3		Représentant autorisé de la Communauté Européenne	9		Sterilisé par irradiation	15		Dispositif médical
4		Date de péremption	10		Consulter le mode d'emploi	16		Système à barrière stérile simple avec emballage extérieur de protection
5		Date de fabrication	11		Marquage CE approuvé par DEKRA	17		Contient ou présence de
6		Code de lot	12		Ne pas utiliser si l'emballage unitaire est ouvert ou endommagé	18		