



Инструкции за потребителите на Cryotec

Основен материал: Корпус (Съдържание: Полиетилен терефталат 98%), фолио (Съдържание: Полиетилен терефталат $\geq 99\%$)

Форма: Съхранение на тъкани

Модел: TEC 010Y, TEC 010B, TEC 010W, TEC 010R, TEC 010G

Опаковка: Вътрешна опаковка: Гама-устойчив PP (полипропилен) / Външна опаковка: OPP (ориентиран полипропилен) торба

Стерилизация: Гама стерилизация

Температура: По време на съхранение: 10°C ~ 25°C

Срок на годност: 2 години след датата на стерилизация.

Предназначение: За витрифициране на клетки, тъкани, ооцити, ембриони и бластоцисти от бозайници.

Инструкции за употреба:

Свалете капачката, поставете клетките върху прозрачния лист така, че криопротекторът да проникне достатъчно. Незабавно поставете вътре течен азот, за да замръзне. С помощта на щипците затворете капачката в течния азот и съхранете в резервоара за течен азот. При размразяването с помощта на щипците отворете капачката в течния азот и направете размразяването.

Процедура за изхвърляне: Тъй като употребеният продукт ще бъде замърсен, моля, изхвърлете го правилно в съответствие със законите и разпоредбите на страната.



REPROLIFE Inc.

2-5-3-9F Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo, 160-0022 Japan

Телефон: +81359258931

Имейл: contact@reprolife.jp URL адрес на продукта : <https://reprolife.jp/en>



MT Promedt Consulting GmbH

Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Germany


Телефон: +496894581020



Внимание :

- 1) Внимавайте листът не се допира до капачката, докато свалите и поставите капачката.
- 2) Ако опаковката е разкъсана или повредена, не я използвайте и я изхвърлете.
- 3) Целият процес на използване на Cryotec трябва да се извършва при стайна температура.
- 4) Да се използва само от специалист.


Витрификация

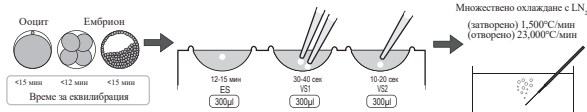

Предпазни мерки:

- 1) Не използвайте продукти с повредена опаковка.
- 2) Не използвайте този продукт ако датата на валидност е изтекла.
- 3) Това устройство трябва да се използва само от лекар, който е запознат с техниката и има опит.
- 4) Това устройство е предназначено само за еднократна употреба.

Затопляне

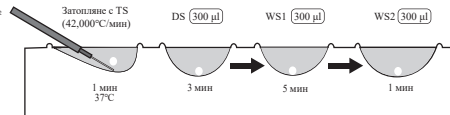

* Препоръчва се да се използва с разтвор и плочи за витрификация и затопляне.

* Разтворът и плочите за витрификация и затопляне се пренасят отделно.

Съкращения: PP (полипропилен), OPP (ориентиран полипропилен), ES (разтвор за еквилибрация), VS1 (разтвор за витрификация 1), VS2 (разтвор за витрификация 2), TS (разтвор за затопляне), DS (разтвор за разреждане), WS1 (разтвор за промиване 1), WS2 (разтвор за промиване 2), LN2 (течен азот)

Символи

№	Символ	Описание	№	Символ	Описание	№	Символ	Описание
1		Производител	7		Не използвайте повторно	13		Температурни ограничения
2		Каталожен номер	8		Не стерилизирайте повторно	14		Страна на производство Произведено в Япония
3		Упълномощен представител в ЕО	9		Стерилизирано чрез облъчване	15		Медицинско изделие
4		Срок на годност	10		Вижте инструкциите за употреба	16		Система с еднократна стерилна опаковка с външна защитна опаковка
5		Дата на производство	11		CE маркировка, одобрена от DEKRA	17		Съдържа или наличие на
6		Партиден код	12		Не използвайте, ако опаковката е отворена или повредена	18		