



Instrukcje dla użytkowników Cryotec

Główny materiał: Korpus (skład: politereftalan etylenu 98%), arkusz folii (skład: politereftalan etylenu $\geq 99\%$)

Forma: Przechowywanie tkanek

Model: TEC 010Y, TEC 010B, TEC 010W, TEC 010R, TEC 010G

Opakowanie: Opakowanie wewnętrzne: Odporne na promieniowanie gamma PP (polipropylen) / Opakowanie zewnętrzne: Torebka OPP (folia polipropylenowa jednoosiowo orientowana)

Sterylizacja: Sterylizowany promieniami gamma

Temperatura: Podczas przechowywania: 10 °C ~ 25 °C

Okres trwałości: 2 lata od daty sterylizacji.

Zastosowanie: Do witryfikacji komórek, tkanek, oocytów, zarodków i blastocyst ssaków.

Instrukcja użytkowania:

Zdjąć nasadkę, umieścić komórki na przezroczystym arkuszu tak, aby krioprotektant przeniknął w sposób wystarczający. Natychmiast wprowadzić do środka ciekły azot w celu zamrożenia. Za pomocą kleszczyków zamknąć nasadkę w ciekłym azocie i przechowywać w zbiorniku z ciekłym azotem. Podczas rozmrażania, za pomocą kleszczyków otworzyć nasadkę w ciekłym azocie i przeprowadzić rozmrażanie.

Proces utylizacji: Ponieważ produkt po użyciu może być zanieczyszczony, należy go zutylizować zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi danego kraju.



REPROLIFE Inc.

2-5-3-9F Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo, 160-0022 Japan (Japonia)

Telefon: +81359258931

E-mail: contact@reprolife.jp Adres URL produktu : <https://reprolife.jp/en>



MT Promedt Consulting GmbH

Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert Germany (Niemcy)


Telefon: +49 6894 581020



Uwaga:

- 1) Należy uważać, aby arkusz nie dotykał nasadki podczas zdejmowania i zakładania nasadki.
- 2) Jeśli opakowanie jest rozdarte lub uszkodzone, produktu nie należy używać, tylko zutylizować.
- 3) Cały proces z użyciem Cryotec powinien być przeprowadzany w temperaturze pokojowej.
- 4) Wyrób ten może być używany wyłącznie przez specjalistę.


Witryfikacja

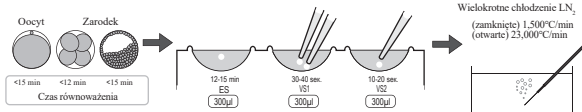

Ostrożność:

- 1) Produkty z uszkodzonym opakowaniem nie mogą być używane.
- 2) Produktu nie można używać po upływie jego daty ważności
- 3) Wyrób ten może być używany wyłącznie przez lekarza posiadającego kwalifikacje techniczne i doświadczenie.
- 4) Jest to wyrób przeznaczony tylko do jednorazowego użytku.

Rozgrzewanie

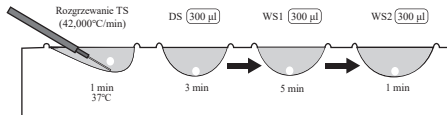

*Zaleca się stosowanie roztworu do witryfikacji i rozgrzewania oraz płytek.

*Roztwory do witryfikacji i rozgrzewania oraz płytki są przenoszone oddzielnie.

Skróty: PP (polipropylen), OPP (folia polipropylenowa jednoosiowo orientowana), ES (roztwór równoważący), VS1 (roztwór witryfikacyjny 1), VS2 (roztwór witryfikacyjny 2), TS (roztwór rozgrzewający), DS (roztwór rozcieńczający), WS1 (roztwór płuczący 1), WS2 (roztwór myjący 2), LN2 (ciekły azot)

Symbole

Nr	Symbol	Opis	Nr	Symbol	Opis	Nr	Symbol	Opis
1		Wytwórca	7		Nie używać ponownie	13		Ograniczenie temperatury
2		Numer katalogowy	8		Nie sterylizować ponownie	14		Kraj produkcji Wyprodukowano w Japonii
3		Upoważniony przedstawiciel na terenie WE	9		Sterylizacja przez napromienianie	15		Wyrób medyczny
4		Data ważności	10		Sprawdzić w instrukcji użytkowania	16		System pojedynczej jałowej bariery z opakowaniem ochronnym na zewnątrz
5		Data produkcji	11		Oznakowanie CE zatwierdzone przez DEKRA	17		Zawiera lub obecność
6		Kod partii	12		Nie używać, jeśli opakowanie jednostkowe jest otwarte lub uszkodzone	18		